

Kosmos

Οδηγός χρήστη του AI Station 2



Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	3
Kosmos AIS	4
Εγκατάσταση του AIS Core	4
Χρήση του βοηθητικού κάδου	5
Ασφάλιση των τροχών	6
Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας AC	6
AIS: Εγκατάσταση του Kosmos Bridge	7
Εγκατάσταση της βάσης του tablet Kosmos Bridge στο AIS	7
Εγκατάσταση του Kosmos Bridge στη βάση του tablet Bridge	8
Αφαίρεση του Kosmos Bridge από τη βάση του tablet Bridge	9
Κλείδωμα του κουμπιού απελευθέρωσης (προαιρετικά)	10
Προσαρμογή της άρθρωσης βάσης του tablet	10
AIS: Kosmos Bridge με Kosmos Hub	12
Εγκατάσταση του Kosmos Hub στο AIS	12
AIS: Kosmos σε Android	16
AIS: Kosmos σε Android χωρίς Power Pack	17
Εγκατάσταση του tablet Android στο AIS	17
AIS: Kosmos σε Android με Power Pack	20
Εγκατάσταση του tablet Android με το Power Pack στο AIS	21
Φόρτιση του Power Pack	23
AIS: Kosmos σε iOS	26
AIS: Kosmos σε iOS χωρίς Hub	26
Εγκατάσταση του tablet iOS στο AIS	27
AIS: Kosmos σε iOS με Kosmos Hub	29
AIS: Kosmos σε iOS με Kosmos Link	34
Εγκατάσταση του Kosmos Link στο AIS	34
Καθαρισμός και απολύμανση	41
Συντήρηση ρουτίνας	41
Καθαρισμός του συγκροτήματος στερέωσης	41
Προδιαγραφές	42
Βάση	42
Kosmos Hub	42
Κουτί περιβλήματος του Hub	42
Τροφοδοτικό του Hub	42
Μήκος καλωδίου Hub προς tablet	42
Kosmos Link	42
Μήκος καλωδίου Link προς tablet	42
Τροφοδοτικό του Link	42
Ασφάλεια	43
Ανακύκλωση και απόρριψη	43
Σύμβολα σήμανσης	44
Στοιχεία επικοινωνίας	48

* Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

* Η Apple χορηγεί άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος «iOS» από την Cisco.

© 2015 έως 2025 EchoNous, Inc. ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εισαγωγή

Το EchoNous προσφέρει παρελκόμενα υλικού εξοπλισμού που επιτρέπουν μεγαλύτερες περιόδους σάρωσης, ταυτόχρονη φόρτιση κατά τη σάρωση και συλλογική φορητότητα για τα tablet Kosmos και όλους τους ηχοβολείς Kosmos.

Το Kosmos AI Station 2 (AIS) είναι μια βάση που σας επιτρέπει να τοποθετείτε και να αφαιρείτε εύκολα το Kosmos Bridge, το tablet Android ή το tablet iOS για άνετη χρήση και φορητότητα.

- Το Kosmos Hub επιτρέπει στους χρήστες του Kosmos Bridge και του iOS να εκτελούν ταυτόχρονα σάρωση και φόρτιση όταν είναι συνδεδεμένο το Lexsa, όταν είναι συνδεδεμένο το Torso ή το Torso-One ή όταν είναι συνδεδεμένο τόσο το Torso/Torso-One όσο και το Lexsa.
- Το Kosmos Link επιτρέπει στους χρήστες του iOS να εκτελούν ταυτόχρονη σάρωση και φόρτιση με συνδεδεμένα τα Lexsa και Torso-One. Διευκολύνει επίσης τη σύνδεση πολλών ηχοβολέων, τους οποίους οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν από την οθόνη του tablet.

	Μόνο για την ΕΕ: Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.
	Το Torso διατίθεται μόνο για το Kosmos Bridge.
	Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις αγορές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για την περιοχή ή τη χώρα σας για να δείτε όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες συναρμολόγησης του AIS Core παραμένουν συνεπείς σε όλες τις πλατφόρμες Kosmos. Μετά τη ρύθμιση του AIS, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες για τη συγκεκριμένη συσκευή.

- Οδηγός εγκατάστασης του AI Station 2, η βάση Core περιλαμβάνεται στο κουτί AIS
- Οδηγός χρήστη του Kosmos (εάν ισχύει)
- Οδηγός χρήστη του Kosmos σε iOS (εάν ισχύει)
- Γρήγορος οδηγός του Kosmos Link (εάν ισχύει)
- Γρήγορος οδηγός του Kosmos Power Pack (εάν ισχύει)

Kosmos AIS


	Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των οδηγιών χρήσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο echonous.com/kosmos-resources .
	Επισκεφτείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση echonous.com/product/device-compatibility για μια τρέχουσα λίστα των συμβατών tablet Android και iOS.

Εγκατάσταση του AIS Core

	Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση του AIS.
---	--


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- AIS- Στήλη
- AIS- Βάση
- Βοηθητικός κάδος
- (2) Κλιπ καλωδίων
- (4) Ασφαλιστικό περικόχλιο 1/4-20
- (4) Επίπεδη ροδέλα 1/4"

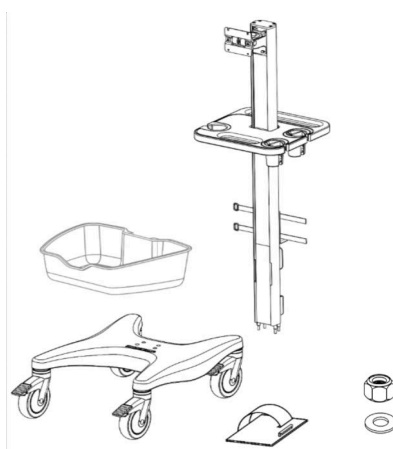


Συναρμολόγηση του AIS:

1. Τοποθετήστε τη βάση και τη στήλη του AIS στο πλάι τους.
2. Ευθυγραμμίστε τις βίδες στο κάτω μέρος της στήλης ώστε να ταιριάζουν με τα ανοίγματα στη βάση. Συνδέστε τη βάση και τη στήλη.
3. Σφίξτε τη βάση και τη στήλη μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα (4) Ασφαλιστικά περικόχλια και τις παρεχόμενες (4) Επίπεδες ροδέλες.

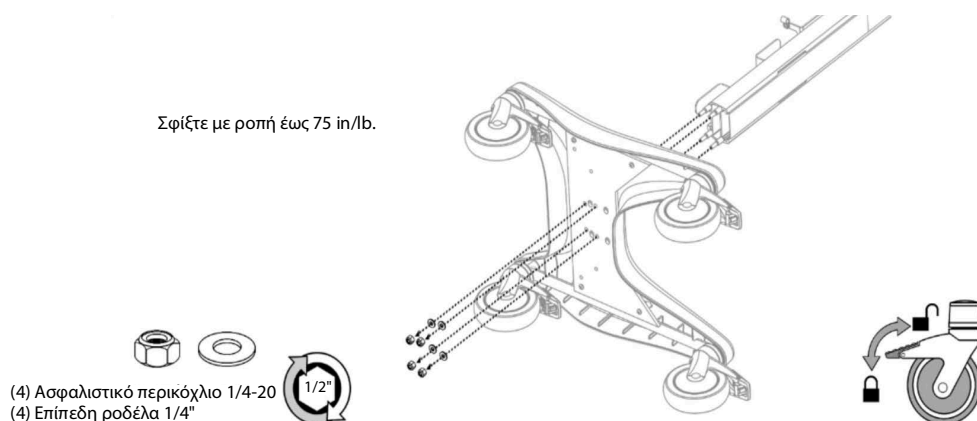


- Μόλις η στήλη και η βάση έχουν συνδεθεί σταθερά, γυρίστε τη βάση σε όρθια θέση και σύρετε τον βοηθητικό κάδο στη θέση του.

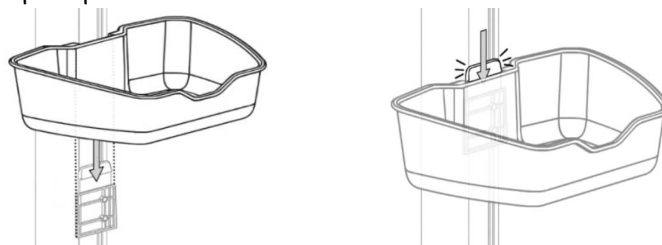


Χρήση του βοηθητικού κάδου

Ο βοηθητικός κάδος μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια 4,5 kg.

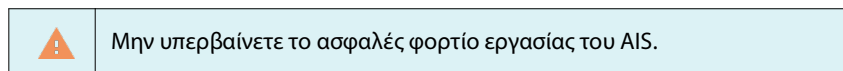

- Για να αφαιρέσετε τον βοηθητικό κάδο για καθαρισμό, πιέστε τη γλωττίδα και σύρετε τον κάδο προς τα επάνω.

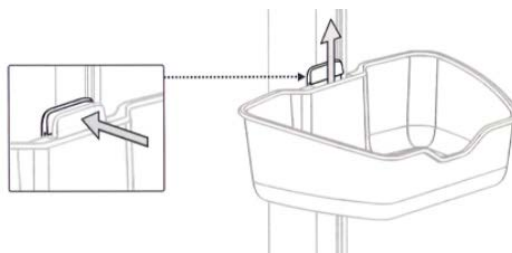


- Για να επανατοποθετήσετε τον κάδο, ευθυγραμμίστε τον με το επάνω άκρο του βραχίονα στερέωσης και σύρετε τον κάδο προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Ασφάλιση των τροχών

Το AIS διαθέτει τέσσερις τροχούς ασφάλισης.

	Το AIS έχει σχεδιαστεί για να κινείται ελεύθερα. Ωστόσο, αφού το τοποθετήσετε στο σημείο όπου θέλετε, ασφαλίστε τους τροχούς για να μην μετακινηθεί κατά λάθος.
---	---

- ★ Για να ασφαλίσετε έναν τροχό, χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να πιέσετε προς τα κάτω τη γλωττίδα.

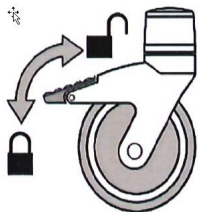

Αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας AC


- ★ Για να αποθηκεύσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, τυλίξτε το καλώδιο στο στήριγμα καλωδίου στο κάτω μέρος της βάσης.

AIS: Εγκατάσταση του Kosmos Bridge



Εγκατάσταση της βάσης του tablet Kosmos Bridge στο AIS

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

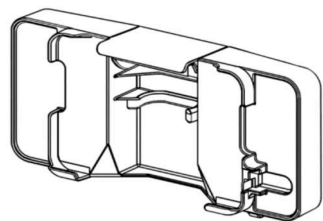

(4) M4 x 8 mm BHTS
(Βίδα Torx με φακοειδή κεφαλή)

(1) M3 x 8 mm BHTS


(1) T-10, (1) T-15, (1) T-20

(2) Κλιπ καλωδίων

(2) M3,5 x 1,65 x 10 mm BHTS

Εγκατάσταση της βάσης του tablet Bridge στο AIS:

1. Με το κλειδί Torx T-20, ασφαλίστε τη βάση του tablet Bridge στη στήλη AIS χρησιμοποιώντας (4) βίδες Torx με φακοειδή κεφαλή (BHTS) M4 x 8 mm.

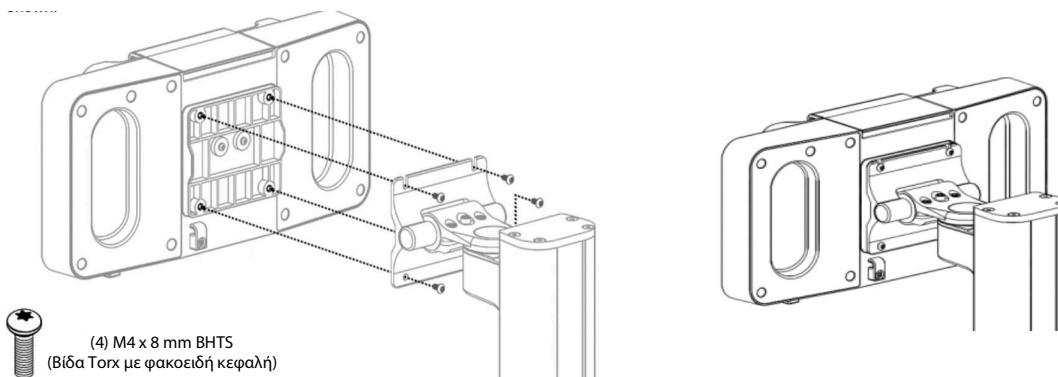


Εγκατάσταση του Kosmos Bridge στη βάση του tablet Bridge


	Βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο είναι πλήρως κλειστό, ώστε το Kosmos Bridge να μην πέσει έξω και προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
--	---

Εγκατάσταση του Kosmos Bridge στη βάση του tablet:


2. Ευθυγραμμίστε το Bridge έτσι ώστε το κάτω άκρο να ακουμπάει στις γωνιακές γλωττίδες της βάσης του tablet.

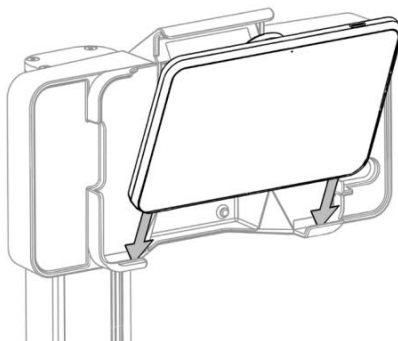

3. Γείρετε το Bridge προς τα πίσω στη βάση του tablet και πιέστε το μέσα. Ενδέχεται να νιώσετε μικρή αντίσταση καθώς πιέζετε τη λαβή μέσα στην υποδοχή.

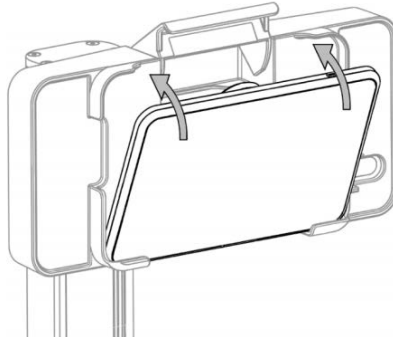

4. Πιέστε προς τα κάτω στο μάνδαλο μέχρι να ασφαλίσει.

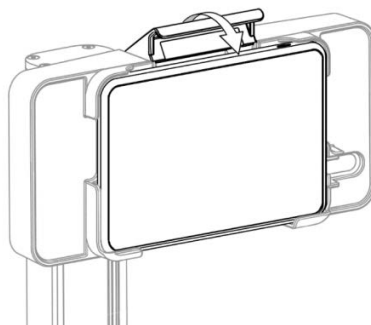

Αφαίρεση του Kosmos Bridge από τη βάση του tablet Bridge

Το κουμπί απελευθέρωσης είναι σκόπιμα κρυμμένο για βελτίωση της ασφάλειας.


	Όταν αφαιρείτε το Bridge από τη βάση, προσαρμόστε το στήριγμα έτσι ώστε να μην έχει κλίση προς τα κάτω προτού πιέσετε την απελευθέρωση, για να μην πέσει στο έδαφος.
	• Το κουμπί απελευθέρωσης απελευθερώνει ταυτόχρονα το μάνδαλο και το καλώδιο USB. • Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης γρήγορα και μέχρι τέρμα. Αυτό διασφαλίζει ότι το καλώδιο USB απελευθερώνεται σωστά.

Αφαίρεση του Bridge από τη βάση του tablet:

5. Βεβαιωθείτε ότι το Bridge είναι στραμμένο προς τα εμπρός και δεν έχει κλίση προς τα κάτω.
6. Υποστηρίξτε το Bridge με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι για να πιέσετε το κουμπί απελευθέρωσης γρήγορα και μέχρι τέρμα στην πίσω επάνω δεξιά υποδοχή της βάσης του tablet.



7. Κρατώντας το επάνω μέρος του Bridge, γείρετέ το προς τα εμπρός και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε από τη βάση.

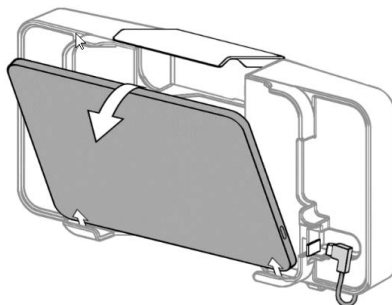


Κλείδωμα του κουμπιού απελευθέρωσης (προαιρετικά)

Εάν θέλετε να διατηρήσετε το Bridge στο AIS, μπορείτε να κλειδώσετε το κουμπί απελευθέρωσης στο επάνω μέρος της βάσης του tablet, για να βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο δεν ανοίγει.

Για να κλειδώσετε το κουμπί απελευθέρωσης:

8. Αφού εγκαταστήσετε το Bridge στη βάση, χρησιμοποιήστε το κλειδί Torx T-10 για να εγκαταστήσετε το BHTS M3 x 8 mm στο πίσω μέρος της βάσης του tablet. Αυτό θα κλειδώσει το κουμπί απελευθέρωσης.

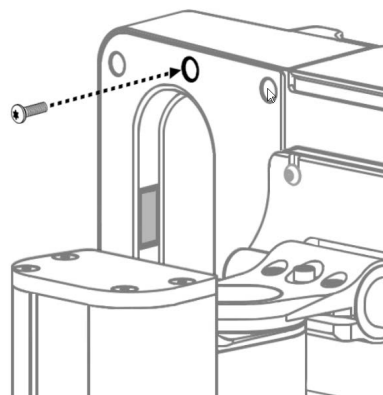


Προσαρμογή της άρθρωσης βάσης του tablet

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη βάση του tablet ώστε να έχει κλίση προς τα επάνω και κάτω (+30/-15 μοίρες) και να περιστρέφεται προς τα αριστερά και δεξιά (+/- 90 μοίρες).

	Η τάση κλίσης και περιστροφής θα πρέπει να ρυθμίζεται μόνο μετά την εγκατάσταση της οθόνης.
	Η κλίση προς τα κάτω είναι σκόπιμα περιορισμένη για να μειωθεί η πιθανότητα πτώσης του Kosmos Bridge, εάν το μάνδαλο ανοίξει κατά λάθος.


Για να προσαρμόσετε την τάση περιστροφής:

9. Με ένα σωληνωτό κλειδί 1/2", σφίξτε ή χαλαρώστε το παξιμάδι τάσης περιστροφής μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τάση περιστροφής. Δεν παρέχεται σωληνωτό κλειδί.

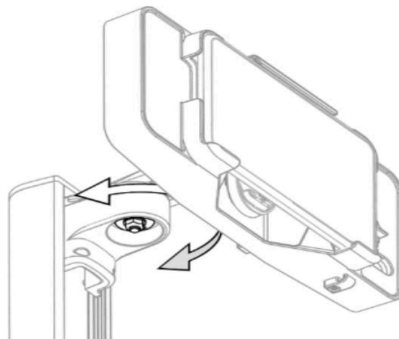

Για να προσαρμόσετε την τάση κλίσης:

10. Με ένα κλειδί Allen 5/32", σφίξτε ή χαλαρώστε τις βίδες προσαρμογής τάσης. Δεν παρέχεται κλειδί Allen.

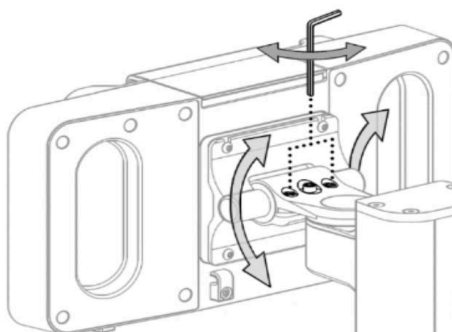

Φροντίστε να υποστηρίξετε το tablet ενώ ρυθμίζετε την τάση. Εάν η τάση είναι πολύ χαλαρή, η βάση του tablet μπορεί να γείρει ξαφνικά προς τα κάτω.

Έναρξη σάρωσης:

11. Συνδέστε το Torso/Torso-One στη θύρα ηχοβολέα κάτω από τη λαβή Bridge.
12. Συνδέστε το Lexsa στη θύρα USB-C στο πλάι του Bridge.

Φόρτιση του Bridge (χωρίς το Hub):

13. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια τροφοδοσίας που παρέχονται με το Bridge, συνδέστε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας USB-C στη θύρα USB-C στο πλάι του Bridge και το άλλο άκρο στην πρίζα. Το Lexsa πρέπει να αποσυνδεθεί από το Bridge.

Συνεχίστε στην επόμενη ενότητα για οδηγίες εγκατάστασης του Kosmos Hub.

AIS: Kosmos Bridge με Kosmos Hub

Εγκατάσταση του Kosmos Hub στο AIS


	Κατά τη σάρωση με το Lexsa, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC εάν είναι ήδη συνδεδεμένο.
	Το Lexsa πρέπει να συνδεθεί στο κουτί περιβλήματος του Hub πριν συνδέσετε το Bridge στο Hub. Το Bridge δεν θα αναγνωρίσει τον ηχοβολέα Lexsa εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η σειρά.
	Το Kosmos Hub πρέπει να συνδεθεί και να στερεωθεί στο Kosmos AI Station πριν από τη χρήση.
	Το κουτί περιβλήματος του Hub δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτό ενώ βρίσκεται στο περιβάλλον του ασθενούς.
	Το Kosmos Hub είναι προς το παρόν διαθέσιμο για το Kosmos Bridge και το Kosmos σε iOS.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- Kosmos Hub
- Κουτί περιβλήματος του Hub
- Καλώδιο USB-C Hub προς Bridge
- Τροφοδοτικό του Hub
- (3) M4 x 12 mm PHMS
- (1) Βίδα ρύθμισης 1/4-20 x 3/4
- (1) Εξαγωνικό κλειδί 1/8"


Στερέωση του κουτιού περιβλήματος του Hub στο AIS:

1. Στη βάση του AIS, εισαγάγετε τη βάση του κουτιού περιβλήματος του Hub, χωρίς το Hub, μέσα από το άνοιγμα.
2. Σύρετε το κουτί περιβλήματος του Hub προς τα επάνω στη ράχη της βάσης.

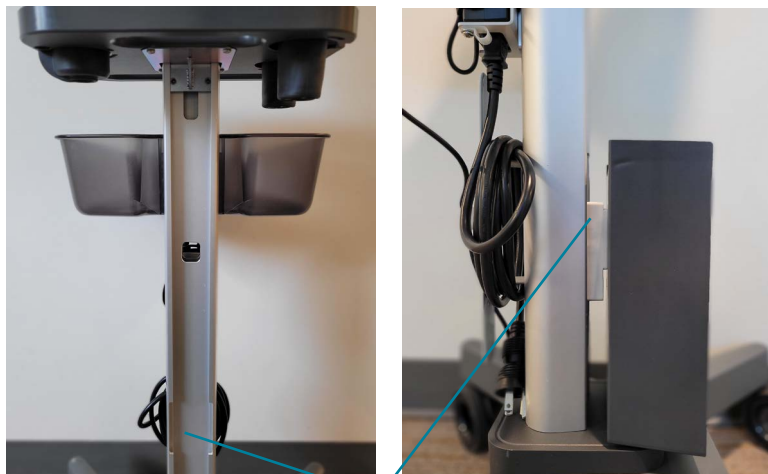

Άνοιγμα για τη βάση του κουτιού περιβλήματος του Hub

3. Στη θέση που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί 1/8" και τη μία βίδα ρύθμισης για να σφίξετε το κουτί περιβλήματος του Hub στο AIS.

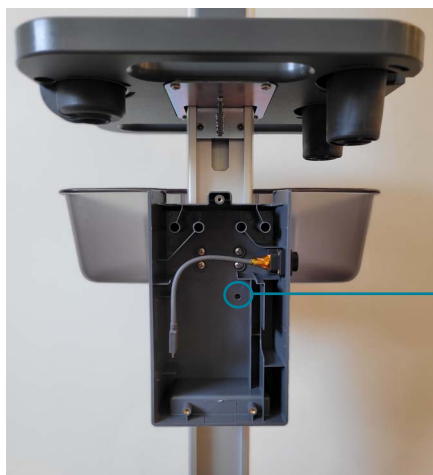


Εισαγάγετε τη βίδα ρύθμισης και σφίξτε με το εξαγωνικό κλειδί 1/8" μέχρι να ασφαλίσει το κουτί περιβλήματος του Hub

Σύνδεση του Hub - Βλ. ακόλουθη εικόνα

4. Πριν τοποθετήσετε το Hub στο κουτί περιβλήματος του Hub, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C Bridge προς Hub στη θύρα USB-C του Hub.
5. Τοποθετήστε το Hub στο κουτί περιβλήματος του Hub. Περάστε το καλώδιο USB-C Bridge προς Hub μέσα από τα εξαρτήματα και το άνοιγμα καλωδίου του κουτιού περιβλήματος του Hub.
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Hub στη θύρα τροφοδοσίας του Hub.
7. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Hub μέσα από τα εξαρτήματα και το άνοιγμα καλωδίου του κουτιού περιβλήματος του Hub.
 - Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον χώρο πίσω από το Hub για να προσαρμόσετε το καλώδιο μέσω των εξαρτημάτων.


8. Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης (USB-C) στις θύρες USB-C στο Hub. Για σάρωση με το Kosmos Lexsa, συνδέστε το Lexsa στην εξωτερική θύρα στην πλευρά του κουτιού περιβλήματος του Hub.

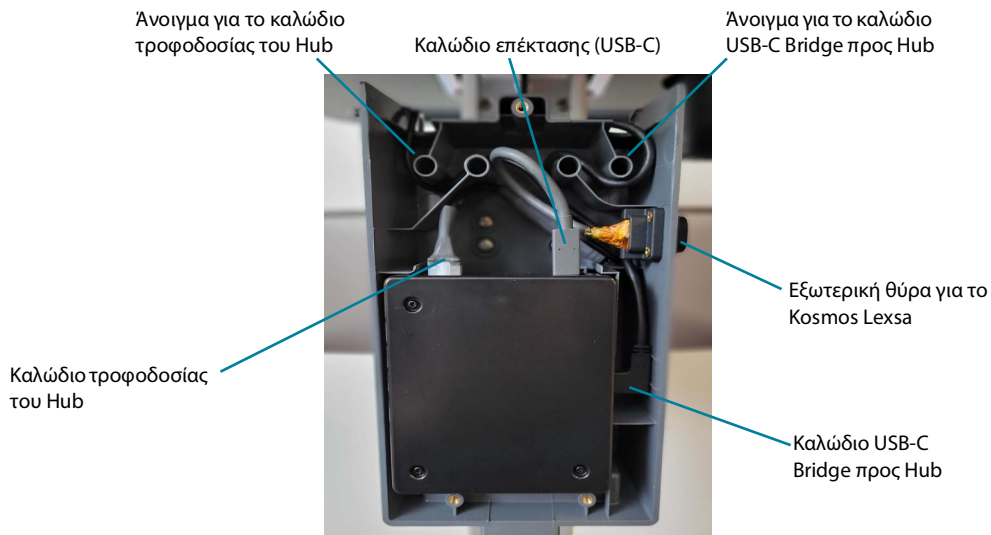

Κατά τη σάρωση με το Torso/Torso-One, συνδέστε το Torso/Torso-One στο Kosmos Bridge (η θύρα βρίσκεται κάτω από τη λαβή του Bridge).

Σύνδεση του Hub στο Bridge

9. Περάστε το χαλαρό άκρο του καλωδίου USB-C Bridge προς Hub μέσα από το Core του AIS και μέχρι τη βάση του Bridge.

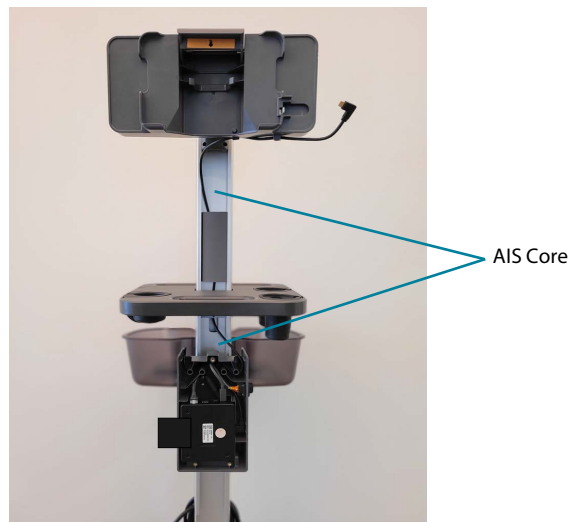

10. Εισαγάγετε το Bridge στη βάση του Bridge και συνδέστε το καλώδιο USB-C Bridge προς Hub στην πλαϊνή θύρα του Bridge.



Θύρα USB-C Bridge προς Hub



Το Lexsa πρέπει να συνδεθεί στο κουτί περιβλήματος του Hub πριν συνδέσετε το Bridge στο Hub.


11. Στερεώστε τα κλιπ καλωδίου στη βάση του tablet Bridge. Περάστε το καλώδιο USB-C Bridge προς Hub μέσα από τα κλιπ καλωδίου και σφίξτε τα κλιπ καλωδίου στη βάση χρησιμοποιώντας το (2) BHTS M3,5 x 1,65 x 10 mm και το κλειδί Torx T-15.



Κλιπ καλωδίου

Ολοκλήρωση της ρύθμισης του Hub

12. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό του Hub.

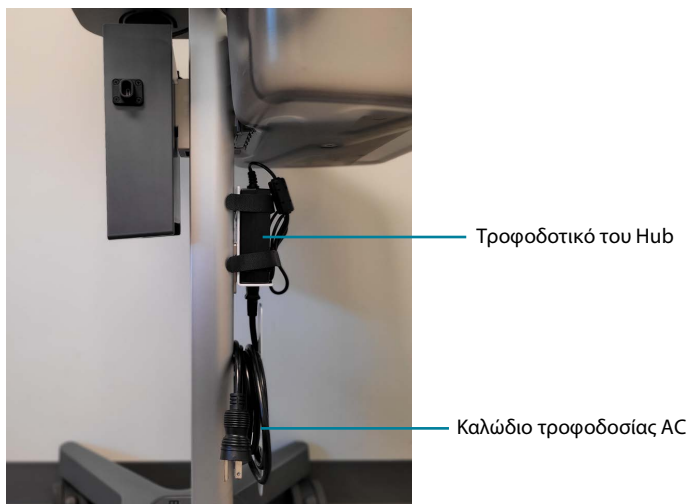

13. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Kosmos.

14. Με την επιτυχή εγκατάσταση του Hub, κλείστε το κουτί περιβλήματος του Hub με τις παρεχόμενες βίδες. Δεν παρέχεται κατσαβίδι Phillips.

AIS: Kosmos σε Android

Μπορείτε εύκολα να στερεώσετε συμβατά tablet Android στο AIS χρησιμοποιώντας τη βάση του tablet Android-iOS. Οι χρήστες tablet Android μπορούν επίσης να στερεώσουν το Power Pack στο AIS.

	Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί χρήστη είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της EchoNous στη διεύθυνση echonous.com/kosmos-resources
	Για μια λίστα συμβατών tablet, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της EchoNous στη διεύθυνση echonous.com/product/device-compatibility
	Το Power Pack διατίθεται μόνο για το Kosmos σε Android.


AIS: Kosmos σε Android χωρίς Power Pack



Εγκατάσταση του tablet Android στο AIS


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- Βάση του tablet Android-iOS
- Βίδες Torx με φακοειδή κεφαλή (4)
- Εξαγωνικό κλειδί T-25
- Ροδέλες (4)
- Κλειδιά βάσης του tablet (2)
- Κλειδί Allen βάσης του tablet
- Penta Nut (4)
- Κλειδί Penta Nut

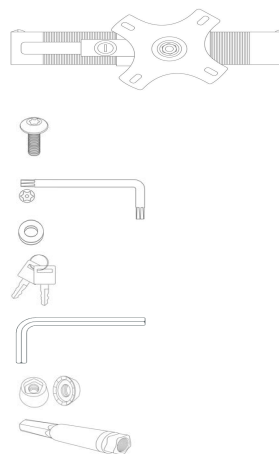


Εγκατάσταση της βάσης του tablet Android-iOS στο AIS:

1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του tablet με την πλάκα στερέωσης AIS. Μόλις ευθυγραμμιστεί, εισαγάγετε τον συνδυασμό ροδέλας/βίδας Torx με φακοειδή κεφαλή μέσα από τα ανοίγματα στις πλάκες στερέωσης και ασφαλίστε τα άκρα με Penta Nut. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί και το κλειδί Penta Nut για να σφίξετε τον υλικό εξοπλισμό.

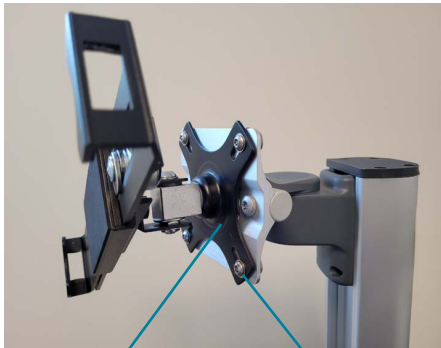

Ροδέλα/Βίδα Torx με φακοειδή κεφαλή

Πλάκα βάσης του tablet Android-iOS

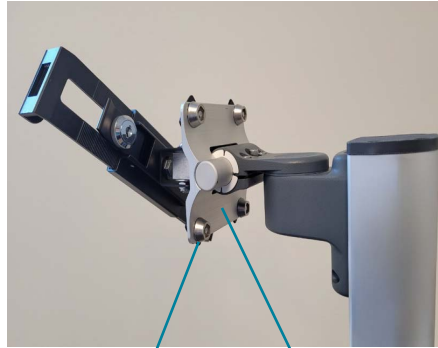


Πλάκα στερέωσης AIS

Penta Nut

Εγκατάσταση του tablet Android στη βάση του tablet Android-iOS:


2. Για να επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης του tablet, χρησιμοποιήστε το κλειδί της βάσης tablet για να ξεκλειδώσετε το μάνδαλο ασφαλείας. Τραβήξτε προς τα πίσω το μάνδαλο και σύρετε/επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης.

Επεκτείνετε το
βραχίονα της
βάσης του tablet

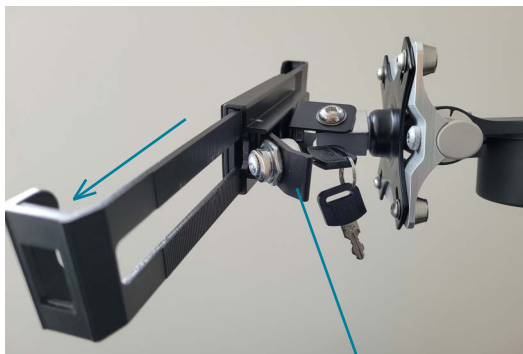

Μάνδαλο ασφαλείας (απασφαλισμένο)

3. Εισαγάγετε τη γωνία του tablet στο σταθερό άκρο της βάσης και ασφαλίστε τη ρυθμιζόμενη γωνία στο tablet. Κλείστε και ασφαλίστε το μάνδαλο ασφαλείας για να συγκρατήσετε το tablet στη θέση του.

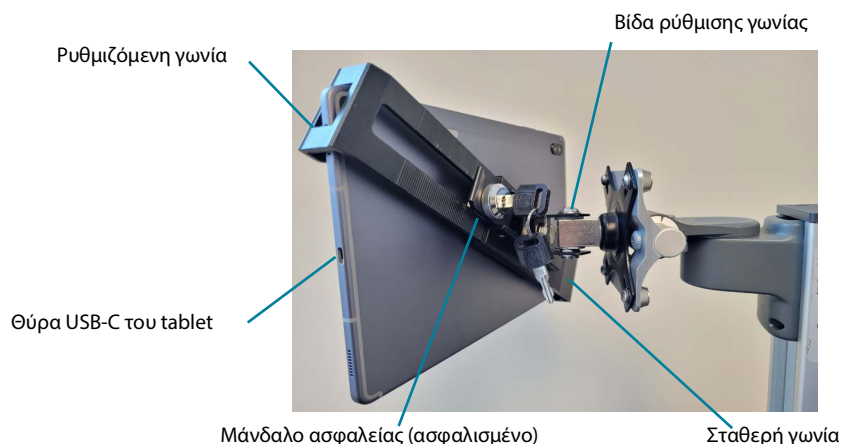

4. Προσαρμόστε τη γωνία του tablet σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τη βίδα ρύθμισης γωνίας. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί Allen της βάσης του tablet.
5. Συνδέστε τον ηχοβολέα Kosmos στη θύρα USB-C του tablet.

AIS: Kosmos σε Android με Power Pack

	Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει το Power Pack πριν από τη χρήση.
	Το Power Pack διατίθεται μόνο για το Kosmos σε Android.
	Το Power Pack πρέπει να συνδέεται πρώτα στο tablet, ώστε να αναγνωρίζεται ο ηχοβολέας από το Power Pack.




Εγκατάσταση του tablet Android με το Power Pack στο AIS

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- Βάση του tablet Android-iOS
- Βίδες Torx με φακοειδή κεφαλή (4)
- Εξαγωνικό κλειδί T-25
- Ροδέλες (4)
- Κλειδιά βάσης του tablet (2)
- Κλειδί Allen βάσης του tablet
- Penta Nut (4)
- Κλειδί Penta Nut
- Βάση του Power Pack
- Power Pack
- Καλώδιο τροφοδοσίας του Power Pack
- Θήκη φορτιστή

Εγκατάσταση της βάσης του tablet Android-iOS και της βάσης του Power Pack στο AIS

1. Ανατρέχοντας στην ακόλουθη εικόνα, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό βίδας Torx με φακοειδή κεφαλή/ροδέλας/Penta Nut για να στερεώσετε τη βάση του tablet και τη βάση του Power Pack στην πλάκα στερέωσης AIS. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί και το κλειδί Penta Nut για να σφίξετε τον υλικό εξοπλισμό.

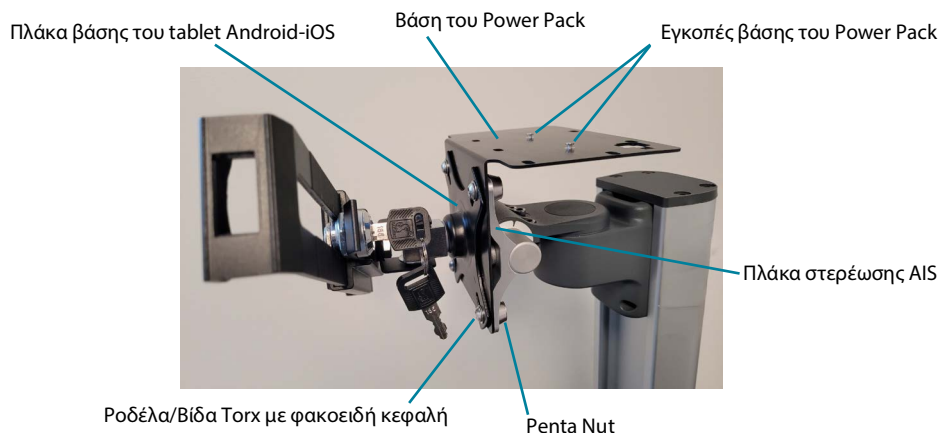


Ασφάλιση του Power Pack στη βάση του Power Pack

2. Ανατρέχοντας στις ακόλουθες εικόνες, τοποθετήστε το Power Pack στη βάση του Power Pack, φροντίζοντας να ευθυγραμμίσετε τις εγκοπές στη βάση με τα ανοίγματα στο Power Pack. Για να ασφαλίσετε το Power Pack στη θέση του, σύρετε το Power Pack και πιέστε τη γλωττίδα προς τα επάνω.



Ανοίγματα
εγκοπών

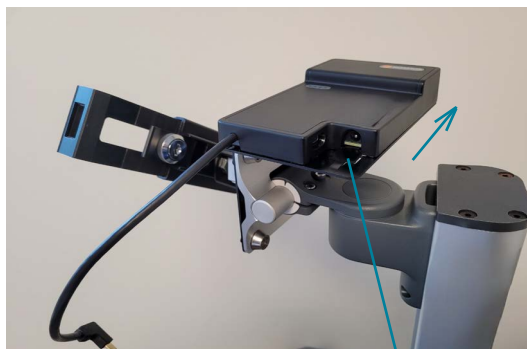


Σύρετε το
Power Pack
για να
ασφαλίσει

Πιέστε τη γλωττίδα προς τα επάνω για να
ασφαλίσετε το Power Pack

Ασφάλιση του tablet Android στη βάση του tablet Android-iOS


3. Για να επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης του tablet, χρησιμοποιήστε το κλειδί της βάσης tablet για να ξεκλειδώσετε το μάνδαλο ασφαλείας. Τραβήξτε προς τα πίσω το μάνδαλο και σύρετε για να επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης.

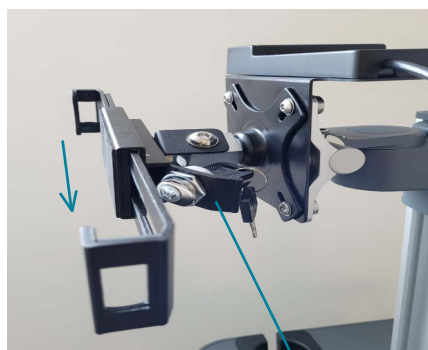

Επεκτείνετε το
βραχίονα της
βάσης του tablet

Μάνδαλο ασφαλείας (απασφαλισμένο)

4. Εισαγάγετε τη γωνία του tablet στο σταθερό άκρο της βάσης και ασφαλίστε τη ρυθμιζόμενη γωνία βάσης στο tablet. Κλείστε και ασφαλίστε το μάνδαλο ασφαλείας για να συγκρατήσετε το tablet στη θέση του.

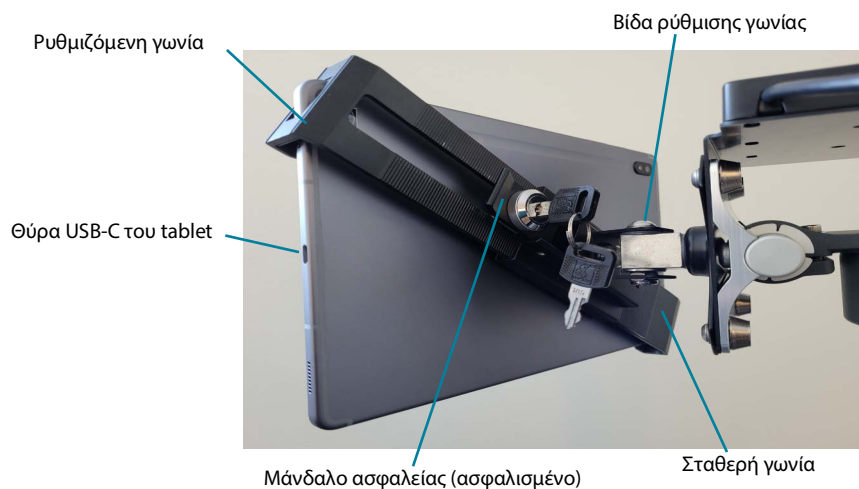

5. Πρώτα, συνδέστε το καλώδιο του Power Pack στη θύρα USB-C του tablet. Στη συνέχεια, συνδέστε τον ηχοβολέα Kosmos στο Power Pack.

 Το Power Pack πρέπει να συνδέεται πρώτα στο tablet, ώστε να αναγνωρίζεται ο ηχοβολέας από το Power Pack.



6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Kosmos και ξεκινήστε τη σάρωση.

Φόρτιση του Power Pack

Χρησιμοποιήστε τη θήκη φορτιστή για να αποθηκεύσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του Power Pack όταν δεν χρησιμοποιείται.

Στερέωση της θήκης φορτιστή στο AIS:

7. Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα για να στερεώσετε τη θήκη φορτιστή στη βάση του τροφοδοτικού. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα.

Φόρτιση του Power Pack:

8. Αποσυνδέστε τον ηχοβολέα Kosmos από το Power Pack.


9. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του AIS μέσα από το Core. Τραβήξτε το καλώδιο μέσα από αυτό προς τα εμπρός.

Πίσω όψη



10. Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας προς τα επάνω στο AIS Core προς το Power Pack

Μπροστινή όψη

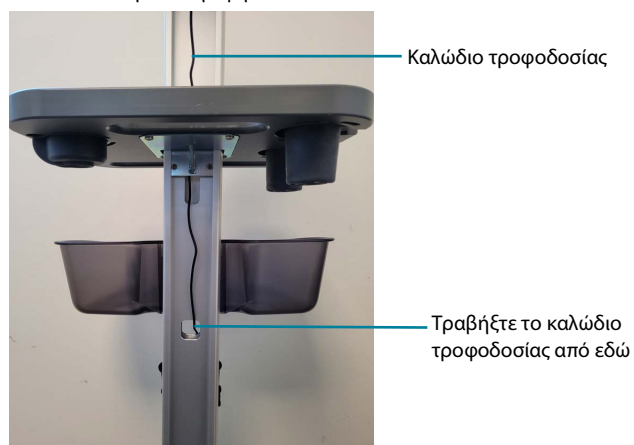

11. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης του Power Pack. Για να φορτίσετε τόσο το tablet όσο και το Power Pack, συνδέστε το καλώδιο USB-C του Power Pack στο tablet.



Καλώδιο τροφοδοσίας του
Power Pack συνδεδεμένο
στη θύρα φόρτισης του
Power Pack

AIS: Kosmos σε iOS

Μπορείτε εύκολα να στερεώσετε συμβατά tablet iOS στο AIS χρησιμοποιώντας τη βάση του tablet Android-iOS. Οι χρήστες του Kosmos σε iOS μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα σάρωση και φόρτιση όταν χρησιμοποιούν το Kosmos Hub και το Kosmos Link.

	Λάβετε υπόψη ότι οι ηλεκτρονικοί οδηγοί χρήστη είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της EchoNous στη διεύθυνση echonous.com/kosmos-resources
	Για μια λίστα συμβατών tablet, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της EchoNous στη διεύθυνση echonous.com/product/device-compatibility
	Λάβετε υπόψη ότι το Kosmos Hub είναι διαθέσιμο μόνο για το Kosmos Bridge και το Kosmos σε iOS.


AIS: Kosmos σε iOS χωρίς Hub



Εγκατάσταση του tablet iOS στο AIS


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- Βάση του tablet Android-iOS
- Βίδες Torx με φακοειδή κεφαλή (4)
- Κλειδί Torx T-25
- Ροδέλες (4)
- Κλειδιά βάσης του tablet (2)
- Κλειδί Allen βάσης του tablet
- Penta Nut (4)
- Κλειδί Penta Nut

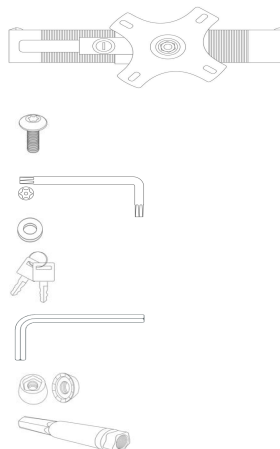

Εγκατάσταση της βάσης του tablet Android-iOS στο AIS


1. Ευθυγραμμίστε τη βάση του tablet με την πλάκα στερέωσης AIS. Εισαγάγετε τον συνδυασμό ροδέλας/βίδας Torx με φακοειδή κεφαλή μέσα από τα ανοίγματα και ασφαλίστε τα άκρα με Penta Nut. Χρησιμοποιήστε το κλειδί Torx και το κλειδί Penta Nut για να σφίξετε τον υλικό εξοπλισμό.

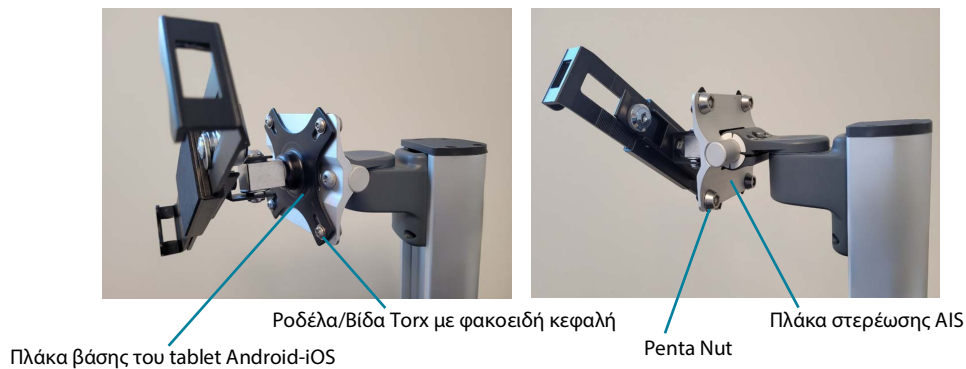

Εγκατάσταση του tablet iOS στη βάση του tablet Android-iOS

2. Για να επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης του tablet, χρησιμοποιήστε το κλειδί της βάσης tablet για να ξεκλειδώσετε το μάνδαλο ασφαλείας. Τραβήξτε προς τα πίσω το μάνδαλο και σύρετε/επεκτείνετε τον βραχίονα της βάσης.

Επεκτείνετε το
βραχίονα της
βάσης του
tablet

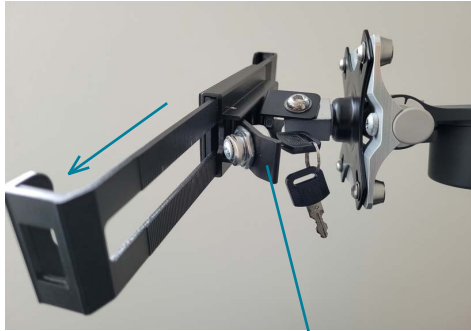


Μάνδαλο ασφαλείας (απασφαλισμένο)

3. Εισαγάγετε τη γωνία του tablet στο σταθερό άκρο της βάσης και ασφαλίστε τη ρυθμιζόμενη γωνία βάσης του tablet. Κλείστε και ασφαλίστε το μάνδαλο ασφαλείας για να συγκρατήσετε το tablet στη θέση του.

Ρυθμιζόμενη γωνία

Βίδα ρύθμισης γωνίας

Θύρα USB-C

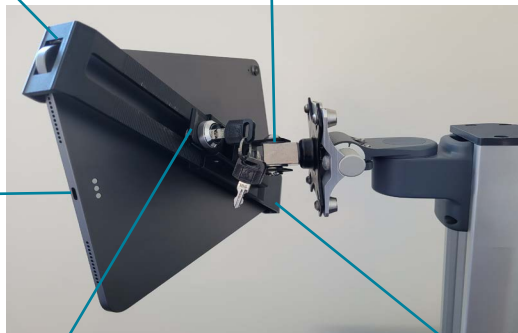

Μάνδαλο ασφαλείας (ασφαλισμένο)

Σταθερή γωνία

4. Προσαρμόστε τη γωνία του tablet σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τη βίδα ρύθμισης γωνίας χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen βάσης του tablet.
5. Συνδέστε τον ηχοβολέα Kosmos στη θύρα USB-C του tablet.

AIS: Kosmos σε iOS με Kosmos Hub



Εγκατάσταση του Kosmos Hub στο AIS


	Κατά τη σάρωση, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, εάν είναι ήδη συνδεδεμένο.
	Το Kosmos Hub πρέπει να συνδεθεί και να στερεωθεί στο Kosmos AI Station πριν από τη χρήση.
	Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB-C iOS προς Hub (P007934) που παρέχεται από την EchoNous για να συνδέσετε το tablet iOS στο Hub. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή του συστήματος.
	Το κουτί περιβλήματος του Hub δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτό ενώ βρίσκεστε στο περιβάλλον του ασθενούς.
	Το Kosmos Hub είναι διαθέσιμο μόνο για τους χρήστες των Kosmos Bridge και Kosmos σε iOS.
	Λάβετε υπόψη ότι δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις αγορές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για την περιοχή ή τη χώρα σας για να δείτε όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά πριν από τη χρήση.

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

- Kosmos Hub
- Κουτί περιβλήματος του Hub
- Καλώδιο USB-C Hub προς Bridge
- Καλώδιο τροφοδοσίας του Hub
- Καλώδιο τροφοδοσίας AC
- (3) M4 x 12 mm PHMS
- (1) Βίδα ρύθμισης 1/4-20 x 3/4
- (1) Εξαγωνικό κλειδί 1/8"


Στερέωση κουτιού περιβλήματος του Hub στο AIS

1. Στη βάση του AIS, εισαγάγετε τη βάση του κουτιού περιβλήματος του Hub, χωρίς το Hub, μέσα από το άνοιγμα. Σύρετε το κουτί περιβλήματος του Hub προς τα επάνω στη ράχη της βάσης.

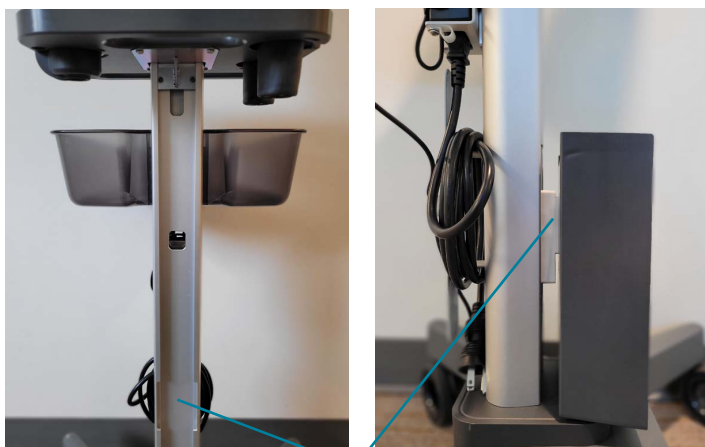

Άνοιγμα για τη βάση του κουτιού περιβλήματος του Hub


2. Στη θέση που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εξαγωνικό κλειδί 1/8" και τη μία βίδα ρύθμισης για να σφίξετε το κουτί περιβλήματος του Hub στο AIS.

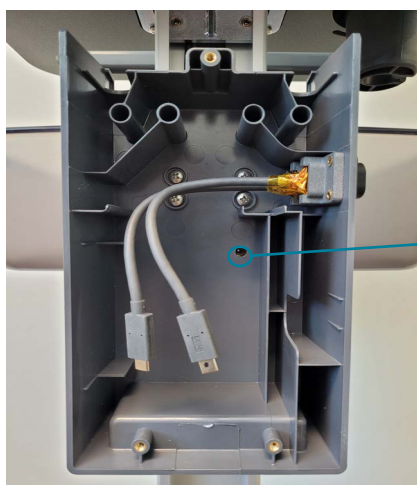

Εισαγάγετε τη βίδα ρύθμισης και σφίξτε με το εξαγωνικό κλειδί 1/8" μέχρι να ασφαλίσει το κουτί περιβλήματος του Hub


Σύνδεση του Hub - Βλ. ακόλουθη εικόνα

3. Πριν τοποθετήσετε το Hub στο κουτί περιβλήματος του Hub, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C iOS προς Hub στη θύρα USB-C του Hub.
4. Τοποθετήστε το Hub στο κουτί περιβλήματος του Hub. Περάστε το καλώδιο USB-C iOS προς Hub μέσα από τα εξαρτήματα και το άνοιγμα καλωδίου του κουτιού περιβλήματος του Hub.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Hub στη θύρα τροφοδοσίας του Hub.
6. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας του Hub μέσα από τα εξαρτήματα και το άνοιγμα καλωδίου του κουτιού περιβλήματος του Hub.
 - Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον χώρο πίσω από το Hub για να προσαρμόσετε το καλώδιο μέσω των εξαρτημάτων.
7. Συνδέστε το καλώδιο επέκτασης (USB-C) στις θύρες USB-C στο Hub.
8. Συνδέστε το Kosmos Lexsa ή/και το Kosmos Torso-One στις εξωτερικές θύρες στο κουτί περιβλήματος του Hub.

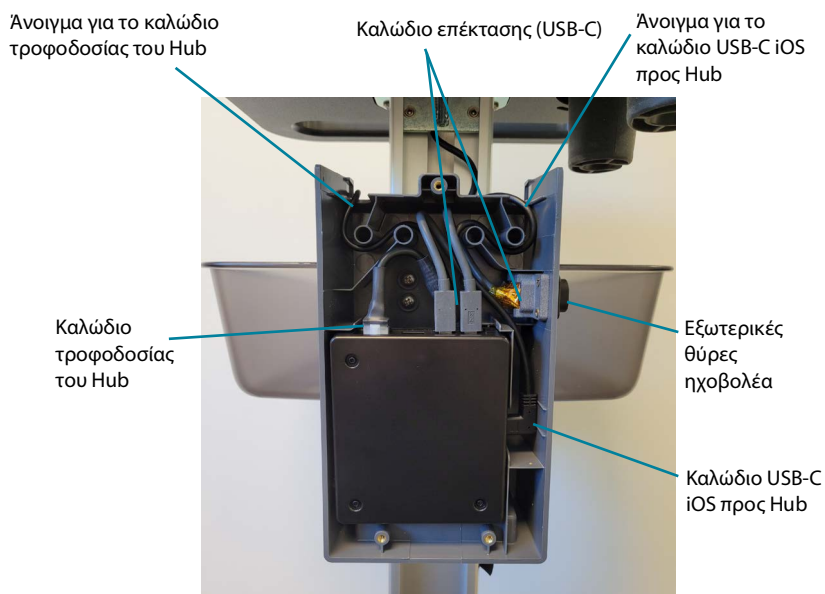

Σύνδεση Hub στη συσκευή iOS και στο τροφοδοτικό

9. Περάστε το χαλαρό άκρο του καλωδίου USB-C iOS προς Hub μέσα από το Core του AIS και μέχρι τη βάση του tablet.

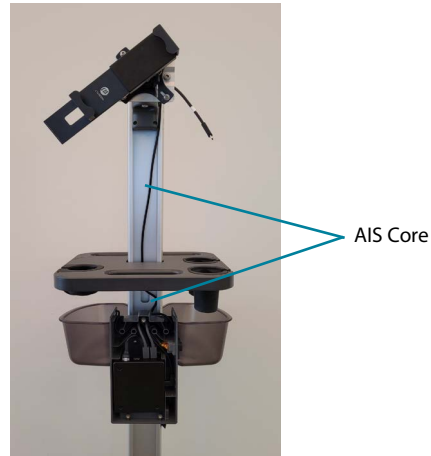


10. Τοποθετήστε τη συσκευή iOS στη βάση του tablet και συνδέστε το καλώδιο USB-C iOS προς Hub στη θύρα USB-C στο πλάι της συσκευής iOS.



Ολοκλήρωση της ρύθμισης του Hub

11. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό του Hub.

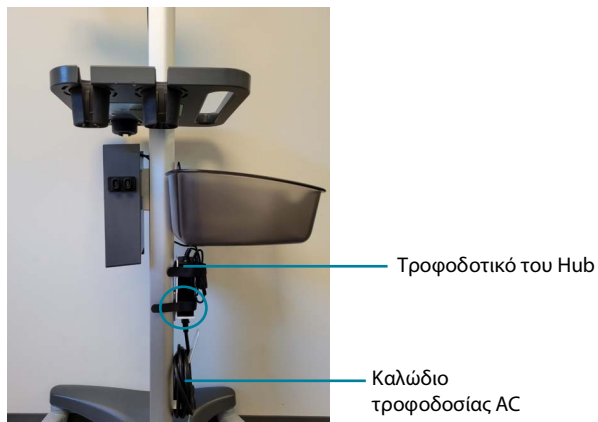

12. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Kosmos.
13. Με την επιτυχή εγκατάσταση του Hub, κλείστε το κουτί περιβλήματος του Hub με τις παρεχόμενες βίδες. Δεν παρέχεται κατσαβίδι Phillips.

AIS: Kosmos σε iOS με Kosmos Link




Εγκατάσταση του Kosmos Link στο AIS

	Κατά τη σάρωση, μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, εάν είναι ήδη συνδεδεμένο, διαφορετικά θα διακοπεί η σάρωση.
	Το Kosmos Link πρέπει να συνδεθεί και να στερεωθεί στο Kosmos AI Station πριν από τη χρήση.
	Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB iOS προς Link (P007934) που παρέχεται από την EchoNous για να συνδέσετε το tablet iOS στο Link. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει διακοπή του συστήματος.
	Το Kosmos Link είναι διαθέσιμο μόνο για τους χρήστες του Kosmos σε iOS.
	Λάβετε υπόψη ότι δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις αγορές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για την περιοχή ή τη χώρα σας για να δείτε όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά πριν από τη χρήση.
	Φορτίζετε το tablet και το Link μόνο με το τροφοδοτικό GlobTek P005974.


Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία;

- Kosmos Link
- Χάρτινο πρότυπο στερέωσης
- Τροφοδοτικό/φορτιστής GlobTek GTM96605-G2A1-T3
- Βραχίονας στερέωσης tablet
- Βάση VESA γρήγορης απελευθέρωσης
- (3) Βίδες ασφαλείας M3 με κλειδί Allen (για τα στοιχεία ολίσθησης)
- (4) Βίδες ασφαλείας M4 με κλειδί Allen (για τη βάση VESA)

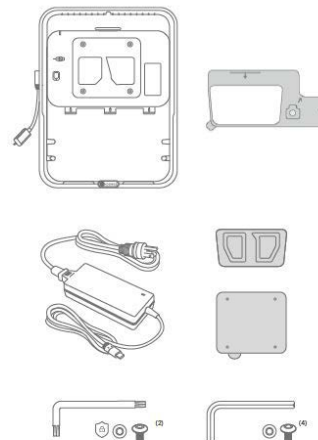


Ρύθμιση του Kosmos Link στο AIS

1. Το Kosmos Link αποστέλλεται σε κατάσταση αδράνειας. Για να ενεργοποιήσετε το Link, συνδέστε το στο καλώδιο τροφοδοσίας AC χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Η λυχνία στο Link θα αλλάξει χρώμα ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Το επίπεδο της μπαταρίας στο Link θα εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή Kosmos iOS.
 - a. 0-20%: Λευκή
 - b. 20-80%: Μπλε
 - c. 80-100%: Πράσινη

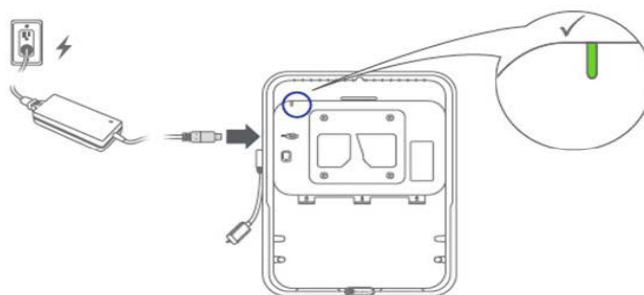


- Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χάρτινο πρότυπο, εγκαταστήστε τον βραχίονα στο tablet. Πιέστε σταθερά για περίπου 1 λεπτό για να στερεωθεί το αυτοκόλλητο. Λάβετε υπόψη ότι το αυτοκόλλητο που χρησιμοποιείται είναι μόνιμο.

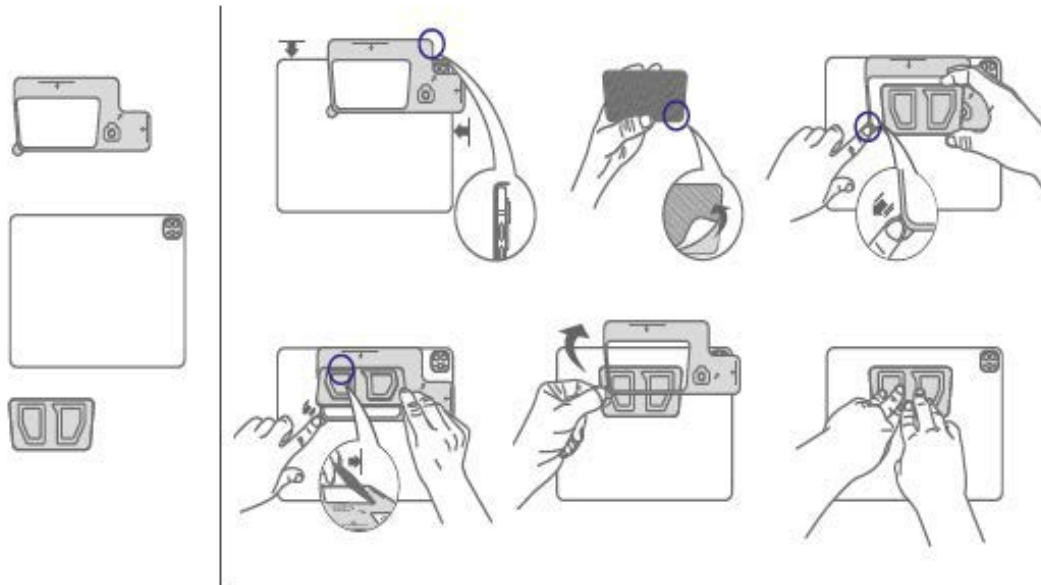


- Συνδέστε το tablet στο Link όπως φαίνεται παρακάτω. Για να διευκολύνετε την εγκατάσταση, τραβήξτε το πορτοκαλί στοιχείο ολίσθησης.


- Προαιρετικά: Εγκαταστήστε 1 από τις παρεχόμενες βίδες ασφαλείας M3 για να εμποδίσετε την αφαίρεση του tablet.

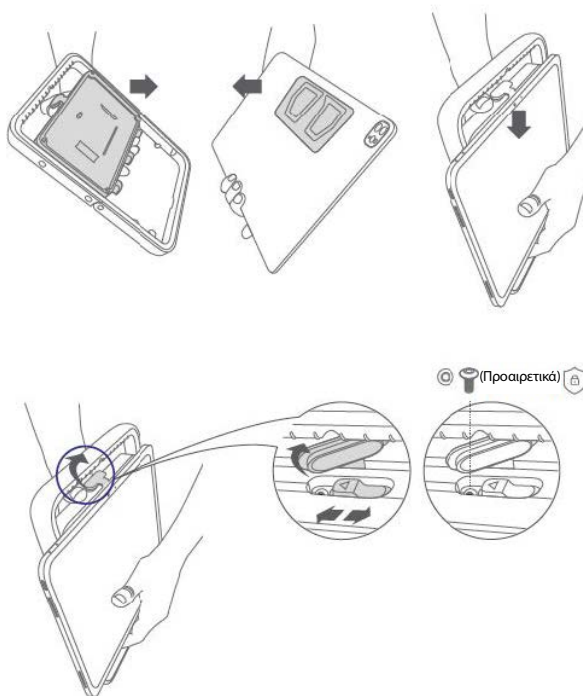


4. Συνδέστε το καλώδιο iOS προς Link όπως φαίνεται στην εικόνα. Λάβετε υπόψη ότι το Kosmos Link διαθέτει ένα στήριγμα, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί για χρήση πάνω σε επιφάνεια τραπεζιού.

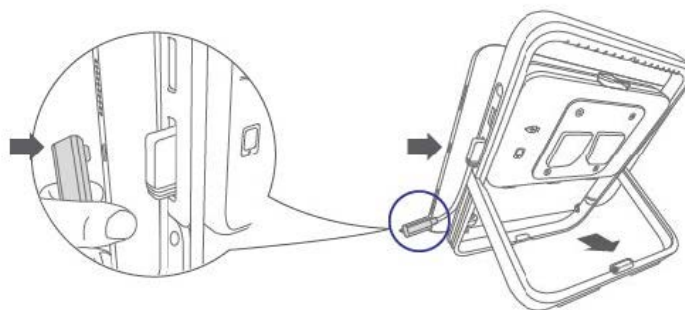


5. Ανοίξτε τις ελαστικές τάπες της θύρας προς τα κάτω και συνδέστε τον μπλε ηχοβολέα όπως φαίνεται στην εικόνα. Περάστε το καλώδιο του ηχοβολέα μέσα από τα άγκιστρα καλωδίου όπως φαίνεται στην εικόνα.

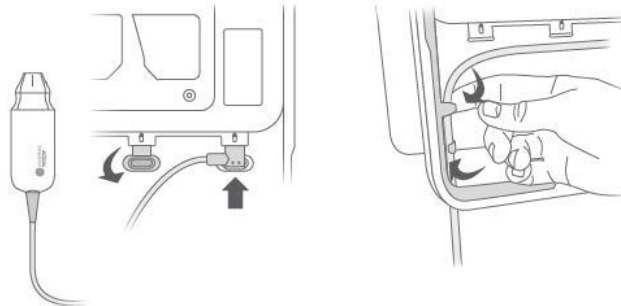


6. Εγκαταστήστε τη βάση VESA γρήγορης απελευθέρωσης στο AIS χρησιμοποιώντας τις (4) παρεχόμενες βίδες ασφαλείας M4. Φυλάξτε το ειδικό κλειδί Allen για μελλοντική χρήση.

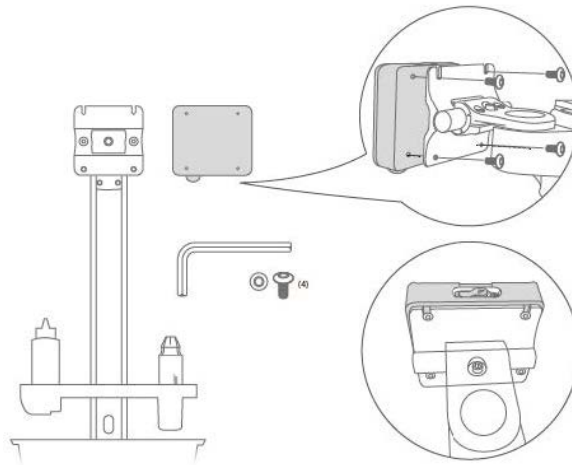


7. Εγκαταστήστε το Kosmos Link στο AIS ευθυγραμμίζοντας τον βραχίονα και σύροντας το Link μέσα στη βάση VESA.
- Προαιρετικά: Εγκαταστήστε 1 από τις παρεχόμενες βίδες ασφαλείας M3 για να εμποδίσετε την αφαίρεση του Link.

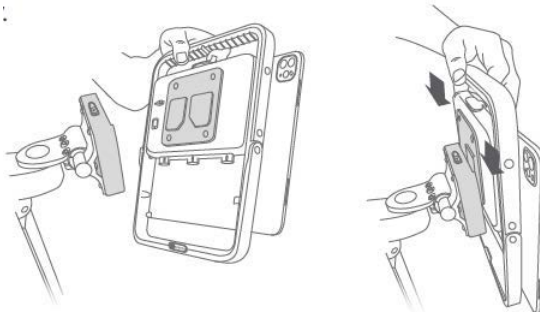

8. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα και προς τα επάνω στον κορμό του AIS, αφήνοντας αρκετό μήκος ώστε να φτάνει στο Kosmos Link. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αντίστοιχη θύρα στο Kosmos Link. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο iOS προς Link είναι συνδεδεμένο.

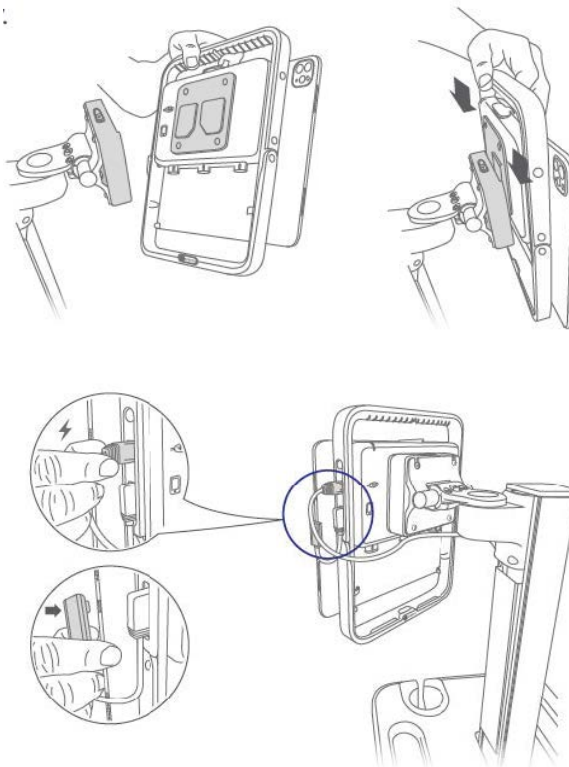

9. Συνδέστε τους ηχοβολείς Torso-One ή/και Lexsa στο Link.
- Λάβετε υπόψη ότι ο οδηγός του πορτοκαλί συνδέσμου έχει 3 διαθέσιμες θύρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από αυτές.
 - Εάν περάσετε τα καλώδια μέσα από τα άγκιστρα όπως φαίνεται παρακάτω, οι συνδέσεις θα προστατευτούν από ακούσιες δυνάμεις που ασκούνται από τον ηχοβολέα ή τον χρήστη.
 - Η εφαρμογή iOS θα επιτρέψει στον χρήστη να επιλέξει ποιον ηχοβολέα θα ενεργοποιήσει.
 - Λάβετε υπόψη ότι η τροφοδοσία για τους ηχοβολείς προέρχεται από το Link, ενώ η τροφοδοσία του tablet ενεργοποιεί την οθόνη.

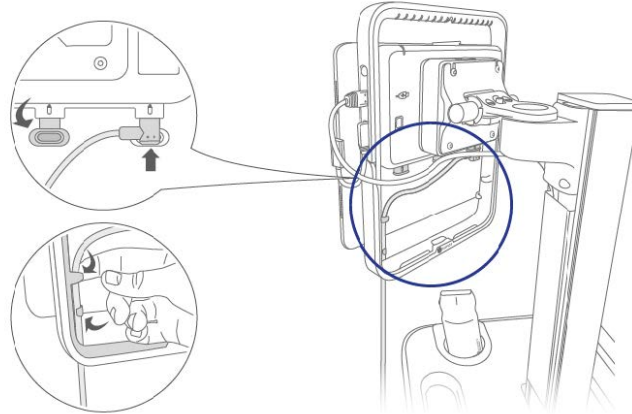

Φόρτιση του Kosmos Link

10. Οι ηχοβολείς μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένοι κατά τη φόρτιση.
11. Συνδέστε τον φορτιστή στο Kosmos Link. Μόλις συνδεθεί, οι λυχνίες LED στο Link θα υποδεικνύουν το γενικό επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Το λευκό χρώμα υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο, το μπλε μεσαίο και το πράσινο πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Κατάσταση μπαταρίας	Επίπεδο μπαταρίας		
	0%-20%	20%-80%	80%-100%
Δεν φορτίζει	Σταθερά λευκή	Σταθερά μπλε	Σταθερά πράσινη
Φόρτιση	Λευκή που αναβοσβήνει	Μπλε που αναβοσβήνει	Πράσινη που αναβοσβήνει

Καθαρισμός και απολύμανση

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση του AIS, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.
(https://assets.gcx.com/documents/documents/DU-CLEAN-01_Rev_A.PDF)

Συντήρηση ρουτίνας

Επιθεωρείτε περιοδικά όλους τους συνδετήρες που σχετίζονται με το συγκρότημα στερέωσης. Σφίξτε ή προσαρμόστε όπως απαιτείται για βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια.

Καθαρισμός του συγκροτήματος στερέωσης

Το συγκρότημα στερέωσης μπορεί να καθαριστεί με τα περισσότερα ήπια, μη λειαντικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται συνήθως στο νοσοκομειακό περιβάλλον (π.χ. διαλύματα χλωρίνης, αμμωνίας ή αλκοόλης).

Το φινίρισμα της επιφάνειας θα καταστραφεί μόνιμα από ισχυρές χημικές ουσίες και διαλύτες όπως η ακετόνη ή το τριχλωροαιθυλένιο.

Δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ατσαλόσυρμα ή άλλο λειαντικό υλικό.

Η ζημιά που προκαλείται από τη χρήση μη εγκεκριμένων ουσιών ή διεργασιών δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Συνιστούμε τη δοκιμή οποιουδήποτε διαλύματος καθαρισμού σε μια μικρή περιοχή του συγκροτήματος στερέωσης που δεν είναι ορατή, ώστε να επαληθευτεί η συμβατότητα.

Ποτέ μην βυθίζετε και μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο συγκρότημα στερέωσης. Σκουπίστε αμέσως τυχόν καθαριστικά προϊόντα από το συγκρότημα στερέωσης χρησιμοποιώντας ένα πανί νοτισμένο με νερό. Στεγνώστε καλά το συγκρότημα μετά τον καθαρισμό.

	Η GCX δεν προβάλλει ισχυρισμούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αναφερόμενων χημικών ουσιών ή διεργασιών ως μέσο ελέγχου λοίμωξης. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ελέγχου λοιμώξεων ή τον επιδημιολόγο του νοσοκομείου σας. Για να καθαρίσετε ή να αποστειρώσετε στερεωμένες συσκευές ή βοηθητικό εξοπλισμό, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες οδηγίες που παρέχονται με αυτά τα προϊόντα.
---	--

Προδιαγραφές

Βάση

- Βάρος: 24,5 kg
- Διαστάσεις: 112 x 51 x 45 cm

Kosmos Hub

- Διαστάσεις: 100 x 116 x 31 mm

Κουτί περιβλήματος του Hub

- Διαστάσεις: 132 x 237 x 71 mm

Τροφοδοτικό του Hub

- Είσοδος: Τροφοδοσία AC 100-240 V 50-60 Hz
- Έξοδος: 5,0 V $\pm 0,25$ V σε μέγιστη ένταση ρεύματος 2,0 A

Μήκος καλωδίου Hub προς tablet

- 1800 mm (70,9")

Kosmos Link

- Διαστάσεις: 295 x 225 x 31 mm

Μήκος καλωδίου Link προς tablet

- 150 mm

Τροφοδοτικό του Link

- Είσοδος: Τροφοδοσία AC 100-240 V 50-60 Hz
- Έξοδος: 5,0 V σε μέγιστη ένταση ρεύματος 4,5 A

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα υπερήχων σας. Ισχύει για τη συσκευή, τους μετατροπείς και το λογισμικό. Η παρούσα ενότητα καλύπτει μόνο γενικές πληροφορίες ασφάλειας. Οι πληροφορίες ασφάλειας που ισχύουν μόνο για μια συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνονται στη διαδικασία για αυτήν την εργασία.

Το σύστημα Kosmos θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από, ή κατόπιν εντολής, και υπό την επίβλεψη ενός εγκεκριμένου ιατρού που είναι εξειδικευμένος να κατευθύνει τη χρήση της συσκευής.

Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό ασφάλειας που προκύπτει σε σχέση με το σύστημα υπερήχων στην EchoNous και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Ανακύκλωση και απόρριψη

Η EchoNous δεσμεύεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο μέσω της υποστήριξης της συνεχούς ασφαλούς και αποτελεσματικής χρήσης των συσκευών, αλλά και μέσω της επικοινωνίας πληροφοριών σχετικά με την ορθή απόρριψη των συσκευών στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους.


Ο εξοπλισμός μπορεί να περιέχει υλικά που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, εάν δεν απορριφθούν σωστά. Όταν μια συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την σωστά ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις.

Το Kosmos Bridge περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου και το σύστημα πρέπει να απορρίπτεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς, επαρχιακούς ή/και εθνικούς κανονισμούς. Η EchoNous συνιστά να μεταφέρετε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό Kosmos σε κέντρο ανακύκλωσης που ειδικεύεται στην ανακύκλωση και απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σε περιπτώσεις στις οποίες οποιοδήποτε στοιχείο του Kosmos εκτεθεί σε βιολογικά επικίνδυνο υλικό, η EchoNous συνιστά τη χρήση περιεκτών βιολογικού κινδύνου σύμφωνα με τους τοπικούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή/και εθνικούς κανονισμούς απόρριψης. Τέτοια εξαρτήματα Kosmos θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικευμένο κέντρο απόρριψης βιολογικών αποβλήτων.

	Μην αποτεφρώνετε και μην απορρίπτετε το Kosmos στα κοινά απορρίμματα, όταν ο κύκλος ζωής του φτάνει στο τέλος του. Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι πιθανώς επιβλαβής για το περιβάλλον και ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς.
	Η μπαταρία ιόντων λιθίου του Kosmos Bridge ενδέχεται να εκραγεί, εάν εκτεθεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μην αποτεφρώνεται και μην καίτε την παρούσα μονάδα για να την καταστρέψετε. Για να απορρίψετε τη μονάδα, επιστρέψτε τη στην EchoNous ή στον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Σύμβολα σήμανσης

Σύμβολο	Περιγραφή από την EchoNous	Οργανισμός Τυποποίησης Αριθμός αναφοράς Πρότυπο
	Υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής. Περιλαμβάνει την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή	Κατασκευαστής Αρ. αναφ. 5.1.1 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
REF	Κωδικός εξαρτήματος ή μοντέλου	Αριθμός καταλόγου Αρ. αναφ. 5.1.6 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
	Ημερομηνία κατασκευής	Ημερομηνία κατασκευής Αρ. αναφ. 5.1.3 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
LOT	Αρ. παρτίδας	Αρ. παρτίδας Αρ. αναφ. 5.1.5 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
SN	Σειριακός αριθμός	Σειριακός αριθμός Αρ. αναφ. 5.1.7 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

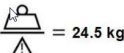Σύμβολο	Περιγραφή από την EchoNous	Οργανισμός Τυποποίησης Αριθμός αναφοράς Πρότυπο
 = 24.5 kg	Μάζα εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του ασφαλούς φορτίου εργασίας. Χρησιμοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1, Ρήτ. 7.2.21.	Καμία
	Ταξινομημένο από το UL. Ιατρικές συσκευές - Γενικός ιατρικός εξοπλισμός όσον αφορά την ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και μηχανικούς κινδύνους αποκλειστικά σε συμμόρφωση με τα πρότυπα: ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) και AMD (2012) / CAN/CSA-C22.2 Αρ. 6060-1 (2008) και (2014). E509516	Καμία
	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης	Οδηγίες λειτουργίας Αρ. αναφ. D.1-11 IEC 60601-1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση
	Οι προφυλάξεις ασφαλείας επισημαίνονται επάνω στο τεχνολογικό προϊόν με αυτό το σήμα.	Προσοχή Αρ. αναφ. D.1-10 IEC 60601-1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση
	Υποδεικνύει ότι το στοιχείο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν	Αρ. αναφ. 5.7.7 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισημάνση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Σύμβολο	Περιγραφή από την EchoNous	Οργανισμός Τυποποίησης Αριθμός αναφοράς Πρότυπο
	Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/ Ευρωπαϊκή Ένωση Σημείωση: Το σύμβολο συνοδεύεται από την επωνυμία και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.	Αρ. αναφ. 5.1.2 ISO 15223-1 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις ετικέτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επισήμανση και πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
	Σήμανση CE Υποδεικνύει ότι μια συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στον MDR 2017/ 745 της ΕΕ και άλλη ισχύουσα νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης	Κανονισμός 2017/745 της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Άρθρο 2, (43)
	Συμβολίζει το συνεχές ρεύμα	Συνεχές ρεύμα Αρ. αναφ. D.1-4 IEC 60601-1 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση
	Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα κοινά απορρίμματα ή σε χώρους υγειονομικής ταφής. Για την απόρριψη, συμβουλευτείτε τη σχετική εγχώρια νομοθεσία	Ξεχωριστή συλλογή Παράρτημα IX Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμβολο	Περιγραφή από την EchoNous	Οργανισμός Τυποποίησης Αριθμός αναφοράς Πρότυπο
	Αντιπρόσωπος στην Ελβετία	Σύμβολο για τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία MU600_00_016e_MB
	Αξιολόγηση συμμόρφωσης του HB	Σύμβολο για τη Συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου. MHRA Department of Business, Energy & Industrial Strategy, 31 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία επικοινωνίας

Ηνωμένες Πολιτείες



EchoNous Inc.
8310 154th Avenue NE
Building B, Suite 200
Redmond, WA 98052

Τμήμα τεχνικής υποστήριξης (χωρίς χρέωση): (844) 854 0800

Τμήμα πωλήσεων (χωρίς χρέωση): (844) 854 0800

Email (τμήμα υποστήριξης): support@EchoNous.com

Ιστότοπος: www.EchoNous.com

Τηλέφωνο: 844-854-0800

Φαξ: 425-242-5553

Email (εταιρικό): info@echonous.com

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
Advena Ltd
Tower Business Centre
2nd Flr, Tower Street
Swatar, BKR 4013
Μάλτα



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ελβετία



QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610-Wohlen
Ελβετία

Υπεύθυνος στο Ηνωμένο Βασίλειο

QServe Group UK, Ltd
49 Greek St, London W1D 4EG,
Ηνωμένο Βασίλειο

Χορηγός στην Αυστραλία

LC & Partners Pty Ltd
Level 32, 101 Miller Street
North Sydney, NSW, 2060
Αυστραλία
Τηλ: +61 2 9959 2400

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στη Βραζιλία

Detentor da Notificação:
VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda
Rua Batataes no 391, conjuntos 11, 12 e 13 - Jardim Paulista
São Paulo - SP - 01423-010

CNPJ: 04.718.143/0001-94

SAC: 0800-7703661

Farm. Resp: Cristiane Ap. de Oliveira Aguirre – CRF/SP: 21.079

Notificação ANVISA no: 80102519147

Suporte ao cliente da EchoNous
Entre em contato com o suporte ao cliente:

Telefone: 844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: info@echonous.com

Site: www.echonous.com

Fabricante:

EchoNous, Inc.
8310 154th Ave NE, Edifício B, Suíte 200
Redmond, WA 98052
Estados Unidos da América

País de Origem: Estados Unidos da América

ANATEL: 00430-22-14521

Καθορισμένος κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

販売名：超音波画像診断装置 KOSMOS Series Plus
管理医療機器
特定保守管理医療機器
一般の名称：汎用超音波画像診断装置（JMDN コード：40761000）
認証番号：306AIBZI00001000
外国指定高度管理医療機器製造等事業者：ECHONOUS, INC.（米国）
選任製造販売業者：有限会社ユーマンネットワーク
2-7-4 Aomi, Koto-ku, the SOHO
Tokyo, 135-0064 Japan
TEL: 03 (5579) 6773