

Elérhetőségeink

Kérdéseivel kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EchoNous® ügyféltámogatásával:

Telefonszám: 1-844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: info@echonous.com

Web: echonous.com

Figyelem! Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Megjegyzés: Nem mindegyik funkció érhető el valamennyi országban. Az Ön régiójában vagy országában elérhető funkciók a használati útmutatóban találhatóak, ezeket olvassa el használat előtt.



Rövid útmutató a kezdéshez

A doboz tartalma

Bridge



Kosmos Bridge




Tápellátás

Lexsa



Kosmos Lexsa

Torso/ Torso-One

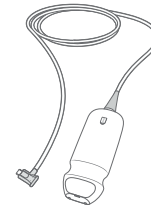


Kosmos Torso



Kosmos Torso-One

Torso Kiegészítők

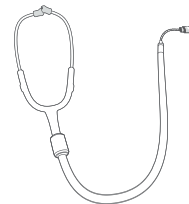


Fülhallgató két fülre



EKG betegkábel


A Bridge feltöltése

Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt a Kosmos Bridge USB-csatlakozásához, a másik végét pedig egy csatlakozóaljzathoz.

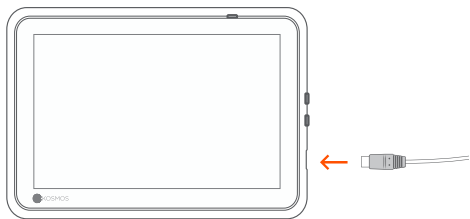


A Torso/Torso-One csatlakoztatása

Csatlakoztassa a Kosmos Torso vagy Torso-One csatlakozókábelt a Kosmos Bridge fogantyúja alatti nyílásba.

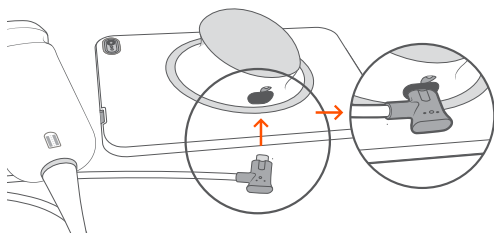


Lexsa csatlakoztatása

Csatlakoztassa a Kosmos Lexsa csatlakozókábelt Kosmos Bridge USB-csatlakozójához.

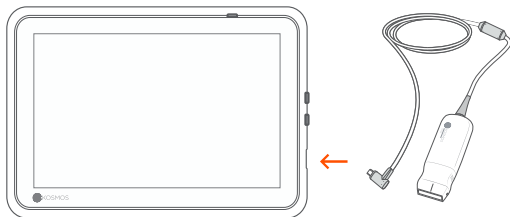


A Kosmos bekapcsolása

Nyomja meg a Kosmos Bridge főkapcsolóját.

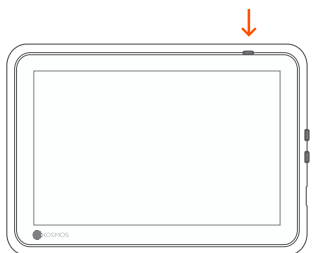

Az állvány üzembe helyezése (opcionális)


Helyezze a Bridge eszközt a kitámasztóállványra, és csatlakoztassa a szondá(ka)t.

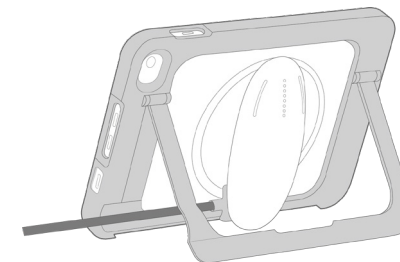

Állítsa be az állványt az optimális betekintési szög eléréséhez, és helyezze sík felületre.


EKG (kizárólag a Torso esetében)


Az EKG görbe megjelenítéséhez csatlakoztassa az EKG betegkábelének mágneses csatlakozóját a Kosmos Torso csatlakozásába.

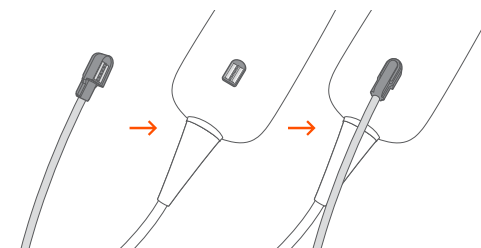

Digitális auszkultáció (kizárólag a Torso esetében)

A digitális auszkultáció meghallgatásához csatlakoztassa a fülhallgató USB-csatlakozóját a Kosmos Bridge USB-csatlakozásához.

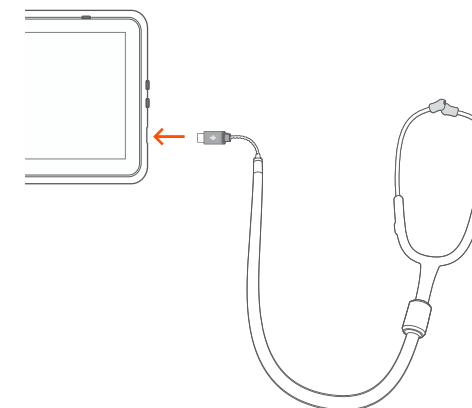

 A további lépésekhez olvassa el a Kosmos felhasználói felület útmutatóját.