




Panduan Cepat

Kosmos Lexsa

Untuk pengguna Bridge dan Android

Layar Beranda

- 1 Pencitraan (MSK (Muskuloskeletal), Nerve (Saraf), Vascular (Vaskular), dan Lungs (Paru-Paru))
- 2 Pasien, Pemeriksaan, Pengaturan, dan Video Tutorial

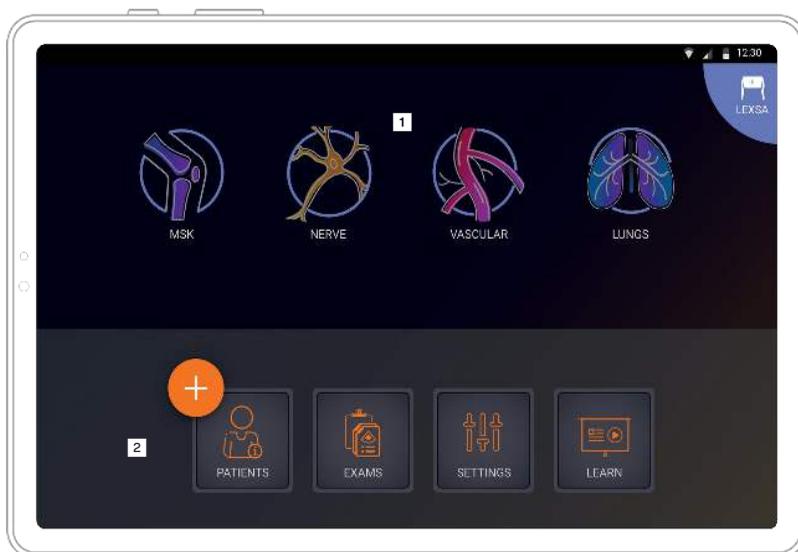

Catatan: Pengguna Android harus menginstal Aplikasi EchoNous Kosmos Ultrasound.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Unduh Aplikasi EchoNous Kosmos: Ultrasound
dari Google Play Store.

Jalankan Aplikasi, hubungkan probe yang
kompatibel, dan Anda pun siap memindai.


Pencitraan

Mode B

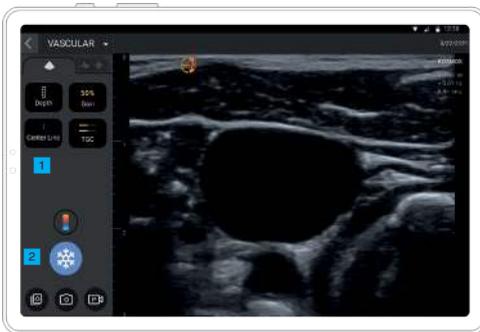


- 1 Garis tengah
- 2 Hentikan

Mode M

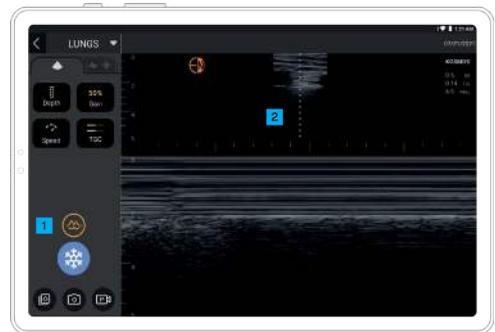


- 1 Mode M hanya tersedia di prasetel Lungs (Paru-Paru)
- 2 Garis M

Doppler Warna

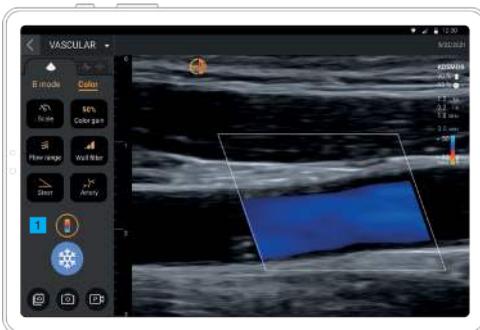

- 1 Mode warna tersedia di prasetel MSK (Muskuloskeletal), Nerve (Saraf), dan Vascular (Vaskular).

Hentikan

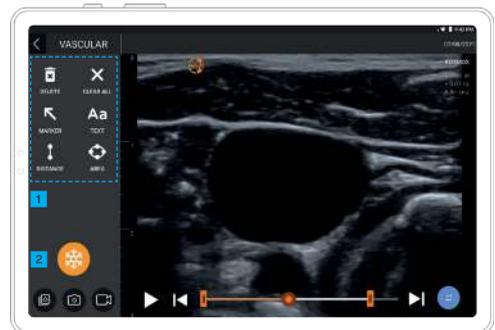

- 1 Anotasi
- 2 Jalankan

Kontak

Dukungan Pelanggan

Telepon 1-844-854-0800
Email support@echonous.com

△ **Perhatian:** Undang-undang federal (Amerika Serikat) menyatakan bahwa perangkat ini hanya boleh dijual oleh atau atas pesanan dokter.

Catatan: Tidak semua fitur tersedia di semua negara. Baca panduan pengguna yang berlaku di wilayah atau negara Anda untuk mengetahui semua fitur yang tersedia sebelum menggunakan.

Fitur yang tersedia mungkin berbeda, bergantung pada perangkat.