




Snabbguide

Kosmos Lexsa

För Bridge- och Android-användare

Startskärm

- 1 Avbildning (MSK, Nerve (Nerv), Vascular (Blodkärl) och Lungs (Lungor))
- 2 Patienter, undersökningar, inställningar och instruktionsvideor

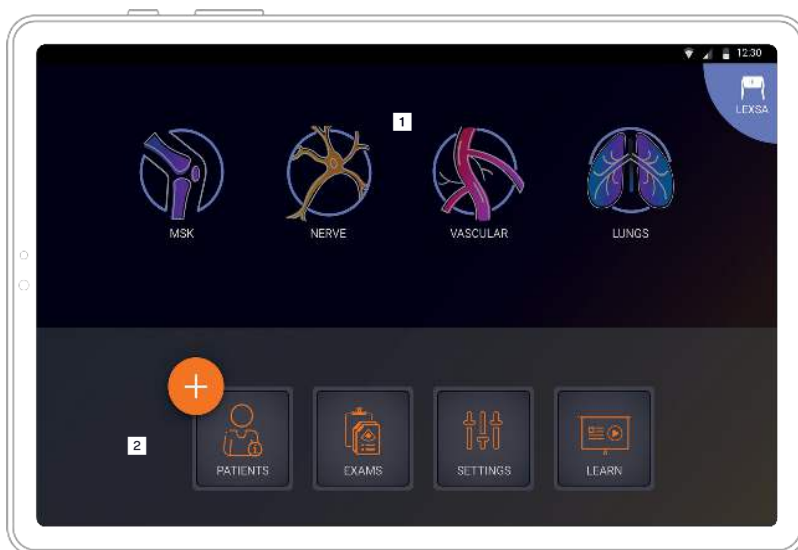

Anmärkning: EchoNous Kosmos Ultrasound-app krävs för Android-användare.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Ladda ner EchoNous Kosmos: Ultrasound-appen från Google Play-butiken.

Starta appen, anslut en kompatibel sond och sedan är du redo att skanna.


Avbildning

B-läge

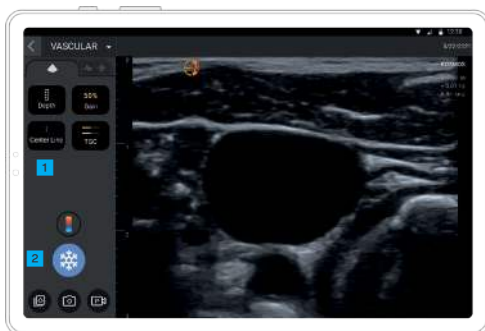


- 1 Mittlinje
- 2 Fry

M-läge

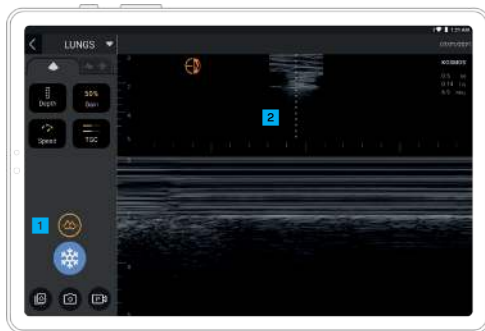


- 1 M-läge är endast tillgängligt i Lungor-inställningen
- 2 M-linje

Färgdoppler

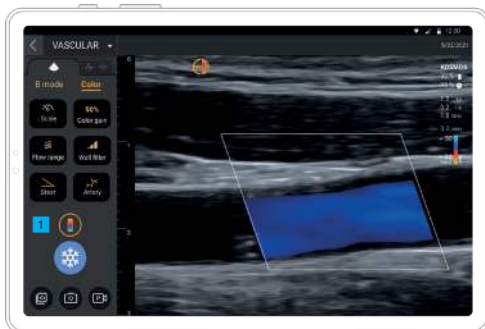

- 1 Färgläge finns tillgängligt i inställningarna MSK, Nerve (Nerv) och Vascular (Blodkär).l).

Frys

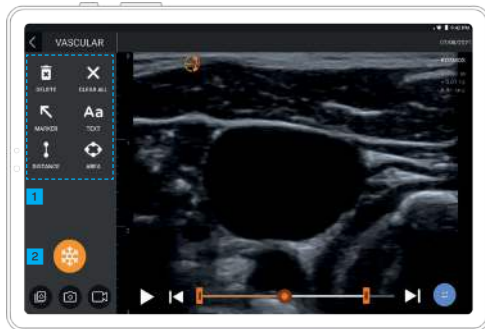

- 1 Annotationer
- 2 Lossa frysning

Kontakt

Kundtjänst

Ring 1-844-854-0800
E-post support@echonous.com

⚠ **Varning:** Federal lagstiftning (USA) begränsar enheten till försäljning av läkare eller på läkares ordination.

Anmärkning: Alla funktioner finns inte tillgängliga på alla marknader. Se användarhandboken för din region eller ditt land om alla tillgängliga funktioner före användning.

Funktioner kan variera mellan olika enheter.