

Ghid de pornire rapidă


Kosmos Lexsa

Pentru utilizatori sistemelor Bridge și Android

Ecran principal

1 Imagistică [MSK (Musculo-scheletic), Nerve (Nerv), Vascular (Vascular) și Lungs (Plămâni)]

2 Pacienți, Examinări, Setări și Tutoriale video

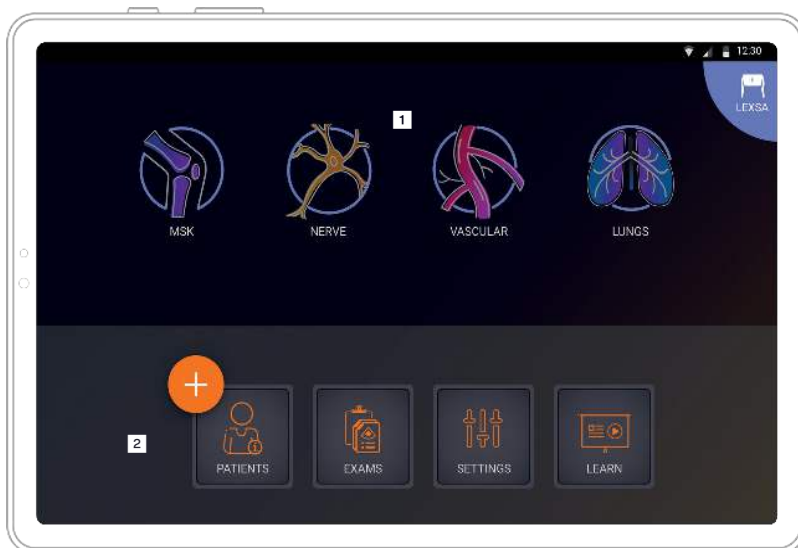

Notă: Aplicația EchoNous Kosmos Ultrasound necesară pentru utilizatorii sistemului Android.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Descărcați aplicația EchoNous Kosmos: Ultrasound din Magazinul Google Play.

Lansați aplicația, conectați o sondă compatibilă și sunteți pregătiți pentru a efectua scanarea.


Imagistică

Mod B

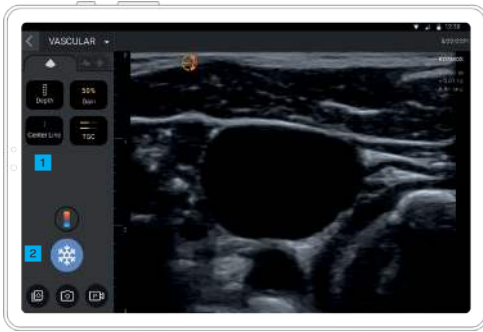

- 1 Linie centrală
- 2 Înghețare

Mod M

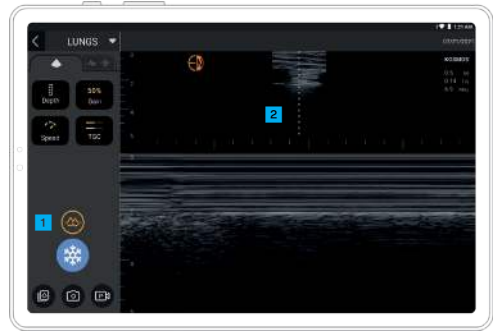


- 1 Modul M este disponibil doar în presetarea Lungs (Plămâni)
- 2 Linie M

Doppler color



- 1 Modul Color este disponibil în presetările MSK (Musculo-scheletic), Nerve (Nerv) și Vascular (Vascular).

Înghețare

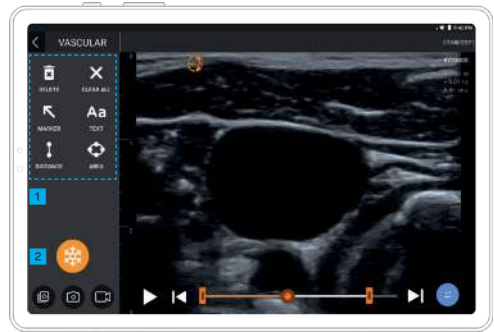

- 1 Adnotări
- 2 Dezghețare

Contact

Asistență clienți

Apelați 1-844-854-0800
E-mail support@echonous.com

⚠ **Atenție:** Legea federală (Statele Unite) restricționează acest echipament la vânzarea de către sau la comanda unui medic.

Notă: Nu toate funcțiile sunt disponibile pe toate piețele. Consultați ghidul utilizatorului din regiunea sau țara dumneavoastră pentru toate funcțiile disponibile înainte de utilizare.

Funcțiile pot varia în funcție de echipamente.