

# Póngase en contacto con nosotros

Para resolver sus dudas, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente de EchoNous®:

Teléfono 1-844-854-0800  
Fax 425-242-5553  
Correo electrónico info@echonous.com  
Página web echonous.com

**Precaución:** La ley federal (Estados Unidos) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por prescripción facultativa.

**Nota:** No todas las funciones están disponibles en todos los mercados. Consulte la guía del usuario de su región o país para ver todas las funciones disponibles antes del uso.



## Guía de inicio rápido

### La caja contiene:

#### Bridge



Kosmos Bridge



Fuente de alimentación

#### Lexsa



Kosmos Lexsa

#### Torso/ Torso-One




Kosmos Torso



Kosmos Torso-One

#### Accesorios Torso

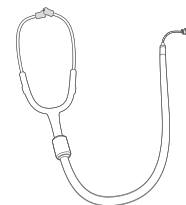


Auriculares biaurales



Cable de ECG del paciente


## Carga de Bridge

Para cargarlo, conecte la fuente de alimentación al puerto USB de Kosmos Bridge y el otro extremo a la toma de corriente.

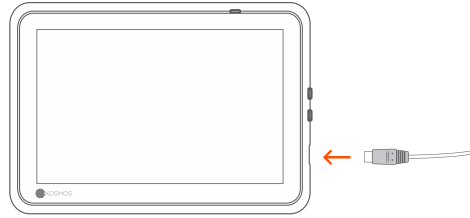


## Conexión de Torso/Torso-One

Introduzca el conector de Kosmos Torso o Torso-One en el puerto que se encuentra debajo del mango de Kosmos Bridge.

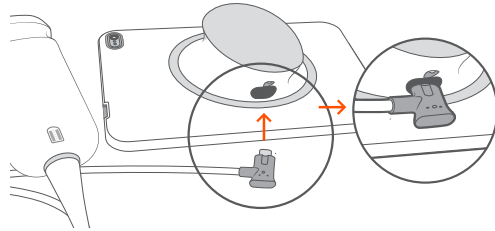


## Conexión de Lexsa

Introduzca el conector de Kosmos Lexsa en el puerto USB de Kosmos Bridge.

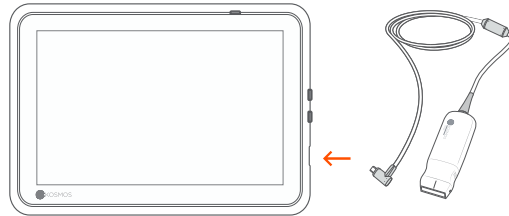

## Encendido de Kosmos


Presione el botón de encendido para encender el Kosmos Bridge.

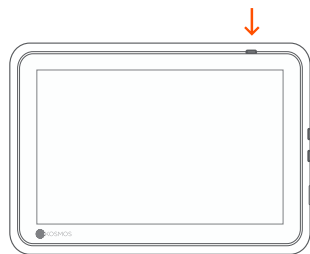

## Montaje del soporte (opcional)


Introduzca Bridge en el soporte y conecte la(s) sonda(s).

Ajuste la posición hasta encontrar el mejor ángulo de visualización y colóquelo sobre una superficie plana.

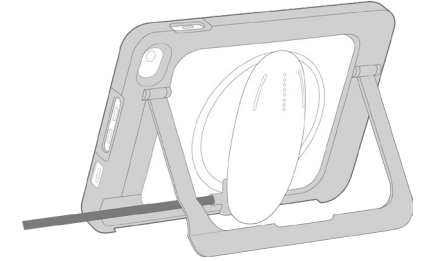


## ECG (solo aplicable a Torso)

Para visualizar la señal de ECG, enchufe el extremo con el conector magnético del cable de ECG del paciente al Kosmos Torso.

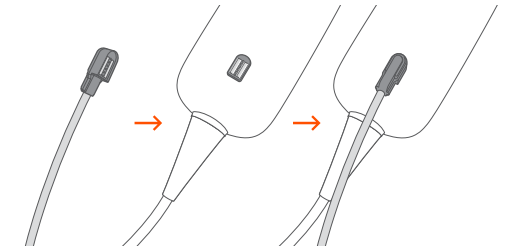

## Auscultación digital (solo aplicable a Torso)

Para oír el sonido de auscultación digital, conecte el extremo USB de los auriculares biaurales al puerto USB de Kosmos Bridge.

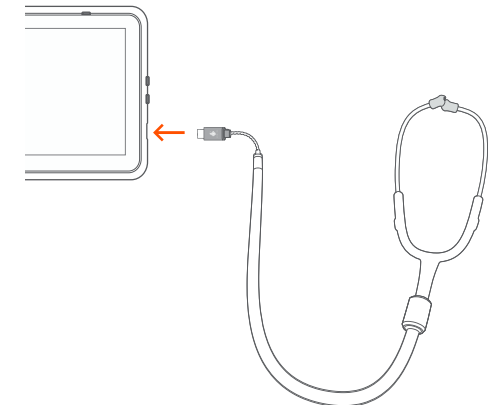

❶ Consulte el Manual de interfaz de Kosmos para conocer los siguientes pasos.