


Rövid útmutató

Kosmos Lexsa

Bridge- és Android-felhasználók számára

Kezdőképernyő

- 1 Képkalkotás (MSK [Mozgásszervi], Nerve [Idegi], Vascular [Érrendszeri] és Lungs [Tüdő])
- 2 Betegek, vizsgálatok, beállítások és bemutatóvideók

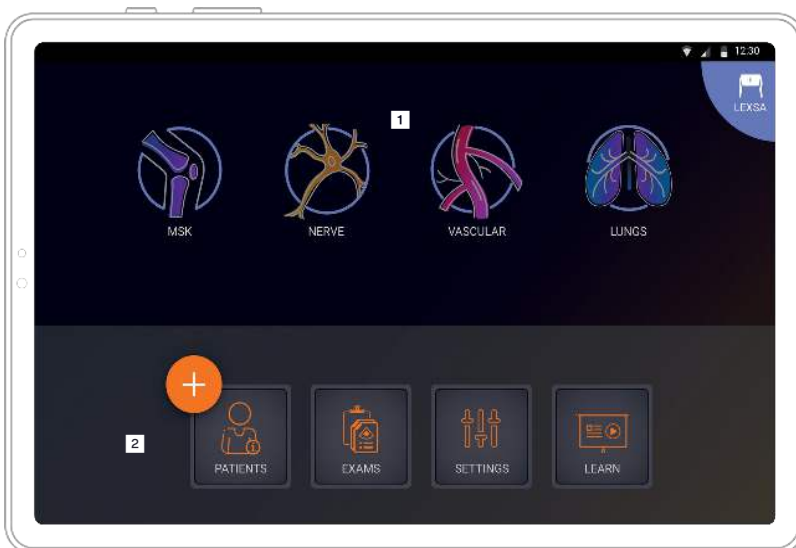

Megjegyzés: Az Android-felhasználóknak szükségük lesz az EchoNous Kosmos: Ultrasound alkalmazásra.



App: Echonous Kosmos: Ultrasound App
Echonous, Inc.




Az EchoNous Kosmos: Ultrasound alkalmazás
letöltése a Google Play Áruházból.

Indítsa el az alkalmazást, csatlakoztasson egy
kompatibilis szondát, és kezdheti is a vizsgálatot.


Képkalkotás

B-mód

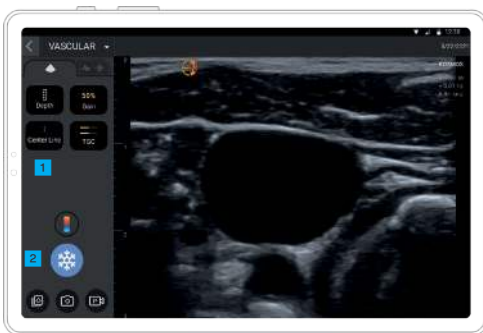

- 1 Középvonal
- 2 Kimerevítés

M-mód

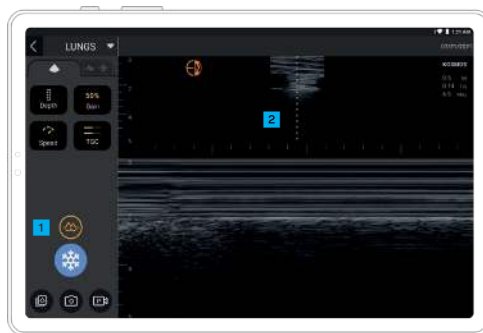


- 1 Az M-mód csak a Lungs (Tüdő) előbeállításban érhető el
- 2 M-vonal

Színes Doppler



- 1 A Színes üzemmód MSK (Mozgásszervi), Nerve (Idegi) és Vascular (Érrendszeri) előbeállítás esetén érhető el.

Kimerevítés

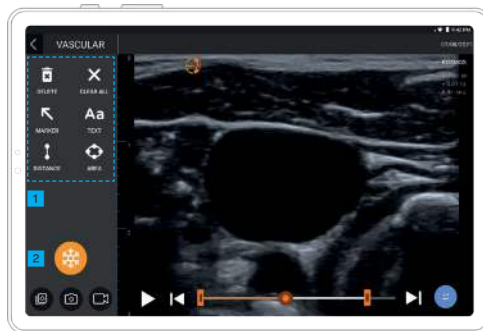

- 1 Megjegyzések
- 2 Kimerevítés leállítás

Elérhetőség

Ügyféltámogatás

Telefon 1-844-854-0800
E-mail support@echonous.com

⚠ **Figyelem!** Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Megjegyzés: Nem mindegyik funkció érhető el valamennyi országban. Az Ön régiójában vagy országában elérhető funkciók a használati útmutatóban találhatók, ezeket olvassa el használat előtt.

A funkciók eszközönként eltérőek lehetnek.